



Hightech combi hydro WKB005.N

Hydrofacial

Multifunktionales 6-in-1-Gerät

Das **Hightech Combi Hydro** ist ein multifunktionales Gerät für fortgeschrittene Ästhetik, das für nicht-invasive Gesichtsbehandlungen entwickelt wurde und 6 Technologien in einem einzigen System kombiniert, um vollständige Protokolle für Tiefenreinigung, Hydratation, Regeneration und Sauerstoffversorgung der Haut durchzuführen.

Seine digitale Touch-Oberfläche ermöglicht eine intuitive Bedienung und erleichtert die Individualisierung der Behandlungen je nach Hauttyp und den Bedürfnissen des Kunden.



Dieses Gerät verfügt über ein fortschrittliches **Hydrodermabrasions-Handstück vom Typ Hydrofacial**, eine der derzeit in der professionellen Ästhetik am stärksten nachgefragten Technologien aufgrund ihrer Wirksamkeit, Vielseitigkeit und sofortigen Ergebnisse.

Das **Hydrofacial** ist eine nicht-invasive kosmetische Behandlung, die eine Tiefenreinigung der Haut ermöglicht, während sie in einem einzigen Verfahren exfoliert, Unreinheiten entfernt und hydratisiert. Dank seines innovativen Systems der kontrollierten Saugkraft und der gleichzeitigen Infusion von

Wirkstoffen wird bereits ab der ersten Sitzung eine sichtbar strahlendere, festere und weichere Haut erreicht.

Die Integration dieser Technologie im Gerät ermöglicht die Durchführung umfassender Behandlungen, die Tiefenreinigung, Hydratation und Regeneration der Haut in einer einzigen Sitzung kombinieren.

 Wie funktioniert die Hydrodermabrasion (Hydrofacial)?

Die Behandlung basiert auf einem Protokoll mit **2 Schlüsselschritten**:

- **Reinigung und Peeling:** Entfernt abgestorbene Zellen und bereitet die Haut vor.
- **Extraktion und Hydratation:** Reinigt die Poren tiefenwirksam durch schmerzfreie Saugung, während gleichzeitig Wirkstoffe infundiert werden, die der Haut Antioxidantien und Nährstoffe zuführen.



Indikationen

- Alle Hauttypen (einschließlich empfindlicher Haut)
- Dehydrierte Haut
- Fettige Haut oder zu leichter Akne neigende Haut
- Fahle Haut oder ungleichmäßige Textur

Hauptvorteile

- Tiefe und nicht-invasive Reinigung
- Sanfte und kontrollierte Exfoliation
- Entfernung von Unreinheiten, Komedonen, überschüssigem Talg und abgestorbenen Hautzellen

- Reduktion erweiterter Poren
- Reduktion von Fett und angesammeltem Talg
- Verbesserung der Hauttextur und -ausstrahlung
- Sofortige, tiefenwirksame Hydratation
- Sauerstoffversorgung der Haut
- Stimulierung der Zellerneuerung
- Verbesserung von Elastizität und Festigkeit
- Steigert die Wirkstoffaufnahme
- Sofortige Ergebnisse ohne Ausfallzeit
- Abschwächung feiner Linien

Systemkomponenten

Das Gerät umfasst:

- Hydro Facial-Handstück
- Vakuumsystem
- Auffangbehälter für Abfälle
- Infusionssystem für Lösungen, 2 Behälter
- 9 austauschbare Hydrospitzen

Arten von Hydrospitzen

Die verschiedenen Spitzen ermöglichen die Anpassung der Behandlung je nach:

- Hauttyp
- Empfindlichkeit
- Behandlungszone
- Peelingstärke
- Vakuumintensität

Die kleineren Spitzen werden verwendet an:

- Nase
- Gesichtskontur
- Lokalisierten Bereichen

Die breiteren Spitzen ermöglichen die Behandlung von:

- Wangen
- Stirn
- Hals

Die Spitzen mit Spirale oder Mikrodermabrasion dienen zur Hautreinigung.

Indikationen

Besonders empfohlen für:

- Fettige oder Mischhaut
- Erweiterte Poren
- Komedonen und Mitesser
- Fahle Haut
- Austrocknung der Haut
- Unregelmäßige Textur
- Stauungszustände der Haut
- Erste Anzeichen der Hautalterung
- Protokolle für Ausstrahlung und Hydratation
- Devitalisierte Haut

Für die meisten Hauttypen geeignet.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei:

- Aktiver Rosazea
- Schwerer entzündlicher Akne
- Offenen Wunden
- Aktiven Infektionen
- Verbrennungen oder Reizungen
- Ausgeprägter Kapillarfragilität
- Extrem sensibilisierter Haut
- Aktiven Hauterkrankungen
- Kürzlich erfolgtem chemischen Peeling
- Kürzlicher Laserbehandlung

Professionelles Anwendungsprotokoll

Vorbereitung der Haut

1. Vorher abschminken und reinigen.
2. Hautdiagnose durchführen.
3. Die geeignete Spitze je nach Hauttyp und Zone auswählen.
4. Die Lösungen und Behälter des Geräts vorbereiten.

Zu dicke oder ölige Produkte in den Behältern des Geräts vermeiden; es sollten speziell für dieses Gerät entwickelte Produkte verwendet werden.

Arbeitstechnik

◇ Reinigung und Peeling

- Mit langsamen und kontinuierlichen Bewegungen arbeiten.
- Das Handstück stets in Bewegung halten.
- Lineare oder aufsteigende Züge ausführen.
- Vermeiden, das Vakuum auf einem Punkt festzuhalten.
- Die Saugkraft entsprechend der Toleranz des Kunden regulieren.

Ziel:

- Abgestorbene Hautzellen entfernen
- Poren reinigen
- Die Haut vorbereiten

◇ Extraktion und Vakuum

- Die Intensität je nach Toleranz schrittweise erhöhen.
- Besonders arbeiten an:
 - T-Zone
 - Nase
 - Kinn

Ziel:

- Unreinheiten entfernen
- Komedonen reduzieren
- Gewebe oxygenieren

◇ Infusion und Hydratation

- Feuchtigkeitsspendende oder antioxidative Lösungen auftragen.
- Mit sanften und gleichmäßigen Bewegungen arbeiten.

Ziel:

- Die Haut nähren
- Die Hydratation verbessern
- Die Leuchtkraft steigern

Empfohlene Zeit

🕒 Protokoll

- **Behandlungsdauer:** 30–45 Minuten
- **Empfohlene Häufigkeit:** **1 Sitzung** pro Monat zur optimalen Erhaltung

Reinigung und Peeling:

🕒 5–10 Minuten

Extraktion und Vakuum:

🕒 5–10 Minuten

Hydratation und Infusion:

🕒 5 Minuten

Ungefähre Gesamtzeit:

🕒 20–30 Minuten

Professionelle Empfehlungen

- Vakuumintensität je nach Hautempfindlichkeit anpassen.
- Konstante Bewegungen beibehalten.
- Das Handstück nicht fest auf der Haut stehen lassen.
- Immer mit geeigneten Lösungen arbeiten.
- Kann kombiniert werden mit:
 - Ultraschall-Peeling
 - Ultraschall
 - Hochfrequenz

- Kältekopf

Zur Ergebnissteigerung.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht auf verletzter oder gereizter Haut anwenden.
- Übermäßigen Druck vermeiden.
- Behälter und Leitungen sauber halten.
- Spitzen nach jeder Anwendung sterilisieren.
- Filter und Vakuumsystem regelmäßig überprüfen.

Hygiene und Wartung

- Spitzen nach jeder Behandlung reinigen und desinfizieren.
- Auffangbehälter entleeren und reinigen.
- Nur kompatible Lösungen verwenden.
- Leitungen frei von Verstopfungen halten.
- Zubehör vor dem Verstauen vollständig trocknen.

Zu erwartende Ergebnisse

Die Haut erscheint:

✦ Reiner und geklärt ✦ Strahlender und gleichmäßiger ✦ Besser mit Feuchtigkeit versorgt und weich ✦ Mit weniger sichtbaren Poren ✦ Besser oxygeniert und revitalisiert ✦ Mit verbesserter Textur und Elastizität ✦ Mit sofortigem Glow-Effekt

Außerdem verfügt es über die folgenden Werkzeuge, die die Hautreinigung erleichtern:

ENTHALTENE TECHNOLOGIEN

1. Ultraschall-Peeling (Spatel)
2. Hydrodermabrasion
3. Ultraschall
4. BIO-Funktion
5. Kalter Hammer
6. Gesichtsnebelspray

ULTRASCHALL-PEELING – Ultraschallspatel (24 kHz)

Das Ultraschall-Peeling ist eine fortschrittliche Peeling-Technologie, die hochfrequente Ultraschallschwingungen über einen Metallsptatel nutzt, um eine Tiefenreinigung durchzuführen und abgestorbene Zellen, überschüssigen Talg und Unreinheiten nicht-invasiv und hautschonend zu entfernen.

Dank der mechanischen Wirkung der Ultraschallwellen und der Mikrovibration entsteht ein Effekt der Tiefenreinigung und zellulären Erneuerung, der die Textur, Leuchtkraft und Oxygenierung der Haut bereits ab der ersten Sitzung verbessert.

Neben der Peeling-Funktion ermöglicht diese Technologie mittels Sonophorese die Einschleusung von Wirkstoffen und unterstützt feuchtigkeitsspendende, regenerierende und Anti-Aging-Behandlungen.



Haupteigenschaften

Das Gerät ermöglicht die Arbeit in zwei Abgabemodi je nach Behandlungsziel:

- ◇ Kontinuierlicher Modus – Peeling und Tiefenreinigung

Erzeugt eine konstante Vibration, die das Entfernen von abgestorbenen Zellen, Komedonen und angesammelten Unreinheiten auf der Hautoberfläche und in den Poren erleichtert.

Vorteile:

- Tiefenreinigung und Tiefenentfernung von Unreinheiten.
- Entfernung von Mitessern.

- Reduktion von Fett und angesammeltem Talg.
- Vorbereitung der Haut auf nachfolgende Behandlungen.
- Sofortige Verbesserung von Leuchtkraft und Textur.
- ◊ Gepulster Modus – Nährstoffversorgung und Wirkstoffpenetration

Gibt intermittierende Impulse ab, ohne konstante Wärme zu erzeugen, ermöglicht das Arbeiten mit höherer Intensität und fördert die Penetration kosmetischer Wirkstoffe.

Vorteile:

- Fördert die Aufnahme von Serum und Ampullen.
- Stimuliert die Mikrozirkulation.
- Verbessert die Gewebeoxygenierung.
- Straffender und revitalisierender Effekt.
- Intensiviert Anti-Aging- und Feuchtigkeitsbehandlungen.

Hauptanwendungen und Vorteile

- Tiefenpeeling und Zellregeneration.
- Entfernung von Unreinheiten, Mitessern und abgestorbenen Zellen.
- Porenreinigung und Reduktion von Komedonen.
- Stimulation von Kollagen und Elastin.
- Verbesserung von Hautton und -textur.
- Erhöhte Leuchtkraft.
- Fördert die Penetration und Absorption kosmetischer Wirkstoffe (Sonophorese).
- Verbessert die Durchblutung und Oxygenierung des Gewebes.
- Hilft, kleine Makel und feine Linien zu verbessern.

Indikationen

Besonders empfohlen für:

- Fettige und Mischhaut.
- Erweiterte und verstopfte Poren.
- Leichte Akne oder gestauchtes Hautbild.

- Fahle und devitalisierte Haut.
- Haut mit ungleichmäßiger Textur.
- Hydrations- und Verjüngungsprotokolle.

Kann auch bei empfindlicher Haut angewendet werden, mit angepasster Intensität und Behandlungszeit.

Kontraindikationen

Nicht anwenden in folgenden Fällen:

- Offene Wunden oder Hautläsionen.
- Aktive Infektionen.
- Schwere entzündliche Akne.
- Aktive Rosazea.
- Extrem empfindliche oder gereizte Haut.
- Herzschrittmacher oder Herzrhythmusstörungen.
- Schwangerschaft (nach fachlicher Einschätzung).
- Metallimplantate im Arbeitsbereich (Vorsicht).

Anwendungsprotokoll

Hautvorbereitung

- Vorab Make-up entfernen und die Haut reinigen.
- Die Haut während des gesamten Verfahrens mit Toner, Wasser oder leitfähiger Lösung feucht halten.

Arbeitstechnik

- ◊ Dauerbetrieb (Desinkrustation)
 - Führen Sie die Spatelklinge in einem Winkel von 45°.
 - Sanfte, aufwärts gerichtete Bewegungen ausführen.
 - Die Spitze der Spatelklinge wird zur Reinigung, zum Abtragen und zur oberflächlichen Extraktion verwendet.
 - Löst abgestorbene Zellen, reinigt Mitesser und klärt die Haut.
- ◊ Impulsbetrieb (Wirkstoffpenetration)
 - Spezifisches Serum oder Ampulle auftragen.

- Mit der flachen Seite der Spatelklinge arbeiten.
- Langsame, kontinuierliche Bewegungen bis zur Aufnahme des Produkts.
- Ideal, um mit höherer Leistung zu arbeiten und das Eindringen von Wirkstoffen (Seren, Ampullen) zu erleichtern.

Empfohlene Zeit


- Reinigung/Peeling: 5–10 Minuten.
- Wirkstoffpenetration: 3–5 Minuten.

Ungefähre Gesamtzeit: 🕒 10–15 Minuten

Professionelle Empfehlungen

- Die Haut während der Behandlung stets feucht halten.
- Intensität an die Hautempfindlichkeit anpassen.
- Keinen übermäßigen Druck ausüben.
- Kann zur Ergebnissteigerung mit Hydradermabrasion, Ultraschall oder Kältehammer kombiniert werden.

GESICHTSULTRASCHALL (1 MHz)

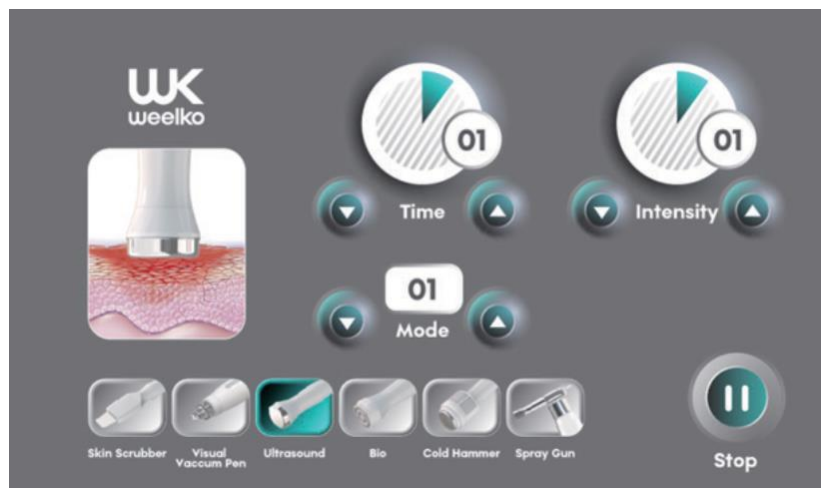

Die Ultraschalltechnologie nutzt hochfrequente mechanische Wellen (1 MHz), um Gewebe in der Tiefe zu stimulieren, die Durchblutung zu verbessern, die Zellregeneration zu fördern und mittels Sonophorese die Penetration von Wirkstoffen zu verstärken.

Das Gerät verfügt über ein Gesichts-Handstück für kleine Bereiche.

Dank der Ultraschallabgabe entsteht eine interne Mikrovibration im Gewebe, die eine bio-stimulierende Wirkung erzeugt, die zelluläre Oxygenierung, die Hautelastizität und die Aufnahme kosmetischer Wirkstoffe verbessert.

Es handelt sich um eine nichtinvasive, schmerzfreie und hochgradig vielseitige Technologie, ideal für Protokolle zur Hydratation, Verjüngung, Straffung und Regeneration des Gesichts.

Haupteigenschaften

- ◇ Ultraschallfrequenz: 1 MHz

Die Frequenz von 1 MHz erlaubt eine geeignete Arbeitstiefe für Gesichtsbehandlungen, wirkt auf oberflächliche und mittlere Gewebeschichten, um regenerative Prozesse zu stimulieren und die Hautqualität zu verbessern.

- ◇ Abgabemodi

Das Gerät ermöglicht je nach Behandlungsziel zwei Betriebsarten:

Dauerbetrieb

Erzeugt eine konstante Ultraschallabgabe und bewirkt einen sanften thermischen Effekt, der die Durchblutung stimuliert und die Geweberegeneration fördert.

Vorteile:

- Stimulierung von Kollagen und Elastin.
- Verbesserung der Durchblutung.
- Zelluläre Stoffwechselaktivierung.
- Straffung und Tonisierung.
- Verbesserung von Textur und Leuchtkraft.

Pulsmodus

Intermittierende Ultraschallabgabe, ideal für empfindliche, sehr dünne Haut oder Behandlungen, die auf das Eindringen von Wirkstoffen abzielen, ohne übermäßige Wärme zu erzeugen.

Vorteile:

- Höhere Hautverträglichkeit.
- Beruhigende und abschwellende Wirkung.
- Verbesserte kosmetische Absorption.

- Ideal für die Augenpartie und empfindliche Haut.

Sonophorese-Funktion

Die Sonophorese ist eine Technik, die Ultraschall nutzt, um das tiefe Eindringen kosmetischer Wirkstoffe zu fördern, da sie die Permeabilität der Haut und Zellmembranen erhöht und so das Eindringen des Produkts in tiefere Hautschichten erleichtert.

Dank der ultraschallbedingten Mikrovibrationen überwinden die Wirkstoffe die Hautbarriere leichter und steigern die Wirksamkeit von Seren, Ampullen und spezifischen Produkten.

Enthaltene Sonden

- ◇ Gesichtssonde

Entwickelt für die Behandlung größerer Bereiche von Gesicht, Hals und Dekolleté.

- Gesichtsstraffung.
- Tiefenhydratation.
- Anti-Aging-Protokolle.
- Regeneration und Revitalisierung.
- Augenkontur.
- Feine Linien.
- Schwellungen und Augenringe.
- Lippenkontur.

Hauptvorteile

- Stimuliert Kollagen und Elastin.
- Verbessert Festigkeit und Elastizität.
- Fördert die Zellregeneration.
- Erhöht das Eindringen von Wirkstoffen.
- Verbessert die Mikrozirkulation.
- Sauerstoffversorgung des Gewebes.
- Mildert Ausdruckslinien.
- Verleiht Leuchtkraft und Vitalität.

Indikationen

Besonders empfohlen für:

- Dehydrierte Haut.
- Gesichtserschlaffung.
- Falten und feine Linien.
- Fahle oder devitalisierte Haut.
- Schwellungen und Augenringe.
- Anti-Aging-Protokolle.
- Straffende und regenerierende Behandlungen.

Geeignet für die meisten Hauttypen durch Anpassung von Parametern und Intensität.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei:

- Schwangerschaft.
- Herzschrittmacher.
- Epilepsie.
- Herzkrankheiten.
- Metallimplantaten im Behandlungsbereich.
- Akuten entzündlichen Prozessen.
- Aktive Infektionen.
- Krebs oder kürzliche onkologische Vorgeschichte.
- Offene Wunden oder Hautläsionen.

Anwendungsprotokoll

Hautvorbereitung

- Vorherige Gesichtsreinigung durchführen.
- Leitgel oder kompatibles Serum auftragen.

Arbeitstechnik

- ◇ Gesichtssonde
- Langsame, kreisende und aufwärts gerichtete Bewegungen.

- Kontinuierlich arbeiten, ohne den Kopf anzuhalten.
- Ständigen Hautkontakt halten.
- Augenkontur, Augenpartie, Narben sanft bearbeiten.
- Langsame, drainierende Bewegungen.
- Niedrige Intensität.

Empfohlene Zeit

Ganzes Gesicht

🕒 8–12 Minuten

Augenkontur

🕒 3–5 Minuten

Ungefähre Gesamtzeit: 🕒 10–15 Minuten

Professionelle Empfehlungen

- Immer Leitgel verwenden.
- Die Intensität je nach Hautempfindlichkeit anpassen.
- Nicht auf trockener Haut arbeiten.
- Den Kopf in ständiger Bewegung halten.
- Kann mit Hydradermabrasion, Ultraschall-Peeling oder Kältehammer kombiniert werden, um die Ergebnisse zu verstärken.

BIO-LIFTING / MIKROSTROM



Die BIO-Funktion des Geräts WKB005.N arbeitet mit Mikroströmen sehr niedriger Intensität, die dazu entwickelt wurden, Hautzellen zu stimulieren und die natürlichen Prozesse der Geweberegeneration und -straffung zu reaktivieren.

Diese Technologie ahmt die natürlichen bioelektrischen Ströme des Körpers nach und wirkt auf zellulärer und muskulärer Ebene, um die Festigkeit, Elastizität und Qualität der Haut nicht-invasiv zu verbessern.

Mikroströme helfen, die ATP-Produktion (zelluläre Energie) zu erhöhen, fördern die Gewebereparatur, die Synthese von Kollagen und Elastin sowie die Verbesserung der Mikrozirkulation. Außerdem wirken sie direkt auf die Gesichtsmuskulatur und erzeugen einen straffenden und festigenden Effekt, der zur Neudefinition der Gesichtskontur beiträgt und der Erschlaffung entgegenwirkt.

Sie besitzen zudem eine wichtige drainierende Wirkung, helfen, Flüssigkeitsretention zu reduzieren, Gewebe zu entstauen und die Hautoxygenierung zu verbessern.

Es ist eine ideale Technologie für Protokolle zur Gesichtsverjüngung, nicht-invasives Lifting, straffende Behandlungen und die Revitalisierung devitalisierter Haut.

Hauptvorteile

- Stimuliert Kollagen und Elastin
- Verbessert Festigkeit und Elastizität
- Strafft die Gesichtskontur
- Hilft, Ausdruckslinien zu reduzieren
- Tonisiert die Gesichtsmuskulatur
- Fördert die Zellregeneration
- Verbessert die Mikrozirkulation
- Hilft bei Drainage und Entstauung
- Revitalisiert die Haut ohne Aggression

Indikationen

- Gesichtserschlaffung
- Devitalisierte Haut
- Ausdruckslinien
- Mangel an Tonizität
- Tränensäcke und Schwellungen

- Anti-Aging- und straffende Protokolle

Anwendungsmodus

Die BIO-Lifting-Funktion arbeitet mit Mikroströmen niedriger Intensität, die auf die Haut und die Gesichtsmuskulatur wirken, um das Gewebe zu stimulieren, zu straffen und zu tonisieren.

Zur korrekten Durchführung der Behandlung:

1. Die Haut zuvor reinigen und abschminken.
2. Leitgel oder ionisierbares Produkt auftragen, um den Stromfluss zu erleichtern.
3. Die geeignete Intensität je nach Empfindlichkeit und Toleranz des Kunden auswählen.
4. Mit langsamen, aufwärts gerichteten und kontinuierlichen Bewegungen über die Gesichtsmuskulatur arbeiten.
5. Stets einen gleichmäßigen Kontakt zwischen Elektrode und Haut aufrechterhalten.
6. Die Intensität schrittweise anpassen, immer mit niedrigen Stufen beginnen.

Die Technik kann durch Bewegungen von durchgeführt werden:

- Anhebung
- Straffung
- Muskeltonisierung
- Lymphdrainage

Insbesondere bei:

- Gesichtsoval
- Wangenknochen
- Stirn
- Kieferkontur
- Hals

Empfohlene Zeit

 10–20 Minuten

Abhängig vom Protokoll und der Hautempfindlichkeit.

Empfohlene Frequenz:  1–2 Mal pro Woche bei intensiven Protokollen.

Indikationen

Besonders empfohlen für:

- Gesichtser schlaffung
- Devitalisierte Haut
- Mangel an Tonus
- Falten und Ausdruckslinien
- Verlust an Festigkeit
- Tränensäcke und Schwellungen
- Haut mit mangelnder Elastizität
- Anti-Aging-Protokolle
- Nicht-invasives Facelifting
- Straffende und revitalisierende Behandlungen

Kann auch in Körperbehandlungen eingesetzt werden, um die Tonizität zu verbessern und die Drainage zu fördern.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei:

- Herzschrittmacher
- Herzerkrankungen
- Schwangerschaft
- Epilepsie
- Krebs
- Metallimplantate in der Region
- Thrombose oder schwere Durchblutungsstörungen
- Aktive Infektionen
- Offene Wunden
- Akute Entzündungsprozesse
- Empfindungsstörungen
- Entgleister Diabetes

Professionelle Empfehlungen

- Intensität entsprechend der Toleranz des Kunden anpassen.
- Nicht auf gereizter oder verletzter Haut arbeiten.
- Die Elektrode stets in Bewegung halten.

- Kann mit Ultraschall, Kältehammer oder Hydrodermabrasion kombiniert werden, um die Ergebnisse zu verstärken.
- Die Behandlung mit straffender und feuchtigkeitsspendender Kosmetik abschließen.

Erwartete Ergebnisse

Die Haut wirkt:

- Fester und straffer
- Mit sichtbarem Lifting-Effekt
- Strahlender und revitalisiert
- Mit besserer Elastizität und Straffheit
- Mit reduzierter Schwellung und Anzeichen von Müdigkeit
- Mit stärker definierter Gesichtsovalität

KÄLTEHAMMER – GESICHTS-KRYOTHERAPIE



Der Kältehammer ist eine Technologie der Gesichtskryotherapie, die entwickelt wurde, um die Haut durch die kontrollierte Anwendung von Kälte auf das Gewebe zu beruhigen, zu entstauen und zu revitalisieren.

Dank seiner gefäßverengenden und beruhigenden Wirkung hilft er, Rötungen, Entzündungen und Hautempfindlichkeit zu reduzieren und ist die ideale Ergänzung, um professionelle Gesichtsbehandlungen abzuschließen.

Der Temperaturabfall, der durch den Kälteapplikator erzeugt wird, begünstigt das Schließen der Poren, verbessert die oberflächliche Mikrozirkulation und vermittelt ein sofortiges Gefühl von Frische und Komfort.

Es handelt sich um eine nichtinvasive, entspannende Technologie, die für die meisten Hauttypen geeignet ist, insbesondere nach Peelings, Ausreinigungen oder ästhetischen Gerätebehandlungen.

Haupteigenschaften

- ◇ Beruhigende und entstauende Wirkung

Die Kälteeinwirkung hilft, die Hautempfindlichkeit zu verringern und die durch intensive Behandlungen verursachte Rötung zu lindern.

- ◇ Vasokonstriktion und Porenschluss

Die Temperaturverringeringung begünstigt die Kontraktion der oberflächlichen Blutgefäße und das vorübergehende Schließen der Poren, wodurch das Hautbild verbessert wird.

- ◇ Erfrischendes und belebendes Gefühl

Schenkt sofortige Frische und hilft, das Gewebe zu entspannen und zu revitalisieren.

Hauptanwendungen und Vorteile

- Beruhigt und entstaut die Haut
- Reduziert Rötungen und Empfindlichkeit
- Fördert den Porenschluss
- Erfrischt und revitalisiert
- Verbessert den Komfort nach der Behandlung
- Fördert die Mikrozirkulation
- Hilft, leichte Entzündungen zu verringern
- Ergänzt intensive Gesichtsprotokolle

Indikationen

Besonders empfohlen für:

- Empfindliche oder sensibilisierte Haut
- Haut mit Rötungen
- Nach Ausreinigungen

- Nach Peelings
- Nach Hydrodermabrasion
- Entstauende Behandlungen
- Beruhigende und feuchtigkeitsspendende Protokolle
- Augensäcke und Gesichtsmüdigkeit

Geeignet für die meisten Hauttypen.

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei:

- Extremer Kälteüberempfindlichkeit
- Aktive schwere Rosazea
- Wichtige Gefäßveränderungen
- Offene Wunden
- Aktive Hautinfektionen
- Kryoglobulinämie oder Erkrankungen im Zusammenhang mit Kälteintoleranz

Anwendungsprotokoll

Vorbereitung

- Zuvor das Gesichtsprotokoll abschließen
- Serum, Maske oder beruhigenden Wirkstoff auftragen, wenn die Ergebnisse verstärkt werden sollen

Arbeitstechnik

- Mit sanften, langsamen und aufwärtsgerichteten Bewegungen arbeiten
- Ständigen Hautkontakt halten
- Auf verstopfte oder sensibilisierte Bereiche besonders eingehen
- Den Handkopf nicht zu lange an derselben Stelle fixiert halten

Kann verwendet werden:

- Nach Gerätetechniken
- Nach Ausreinigungen oder Peelings
- Als Abschlussphase der Behandlung

- Zur Verstärkung des Komfort- und Entspannungsgefühls

Empfohlene Zeit

🕒 5-10 Minuten

Abhängig von der Hautempfindlichkeit und dem Behandlungsziel.

Professionelle Empfehlungen

- Den Handkopf nach jedem Gebrauch sauber und desinfiziert halten
- Die Einwirkzeit an die Toleranz des Kunden anpassen
- Keine übermäßige Druckausübung
- Kann mit Hydrodermabrasion, Ultraschall, Ultraschallpeeling und Gesichtsnebelspray kombiniert werden
- Die Löcher des Handstücks nicht abdecken.

Erwartete Ergebnisse

Die Haut erscheint sofort:

- Beruhigter und entstaut
- Frisch und revitalisiert
- Mit geringerer Empfindlichkeit und Rötung
- Gleichmäßiger und angenehmer
- Mit entspanntem und strahlendem Aussehen

GESICHTSNEBEL-SPRAY – Wirkstoffinfusion.



Das Gesichtsnebelspray ist eine Technologie, die dafür entwickelt wurde, kosmetische Lösungen und Wirkstoffe in ultrafeine Partikel zu vernebeln, wodurch eine gleichmäßige, leichte und hochgradig erfrischende Anwendung auf der Haut ermöglicht wird.

Dieses System kombiniert Hydratation, Oxygenierung und Hautrevitalisierung durch die kontrollierte Zerstäubung kosmetischer Wirkstoffe, was die Aufnahme verbessert, die Haut beruhigt und sofortige Frische verleiht.

Dank seiner entstauenden und erfrischenden Wirkung ist es ein ideales Werkzeug zur Ergänzung professioneller Gesichtsprotokolle, insbesondere nach Peelings, Hydrodermabrasion oder ästhetischer Gerätetechnik.

Es handelt sich um eine nicht-invasive, komfortable Behandlung, die für alle Hauttypen geeignet ist.

Hauptmerkmale

- ◇ Ultrafeine Vernebelung von Wirkstoffen

Das System verwandelt kosmetische Lösungen in einen leichten Mikro-Nebel, der sich homogen auf der Haut verteilt, eine bessere Aufnahme fördert und ein sofortiges Gefühl von Hydratation und Frische vermittelt.

- ◇ Oxygenierung und Revitalisierung der Haut

Die Zerstäubung trägt zur Verbesserung der oberflächlichen Oxygenierung der Haut bei und verleiht sofortige Leuchtkraft und Revitalisierung.

- ◇ Beruhigende und entstauende Wirkung

Ideal, um die Haut nach ästhetischen Behandlungen zu beruhigen und das Gefühl von Hitze, Reizung oder Empfindlichkeit zu reduzieren.

Hauptanwendungen und Vorteile

- Sofortige Hydratation
- Erfrischend und beruhigend
- Verbessert die Absorption kosmetischer Wirkstoffe
- Schenkt Strahlkraft und einen revitalisierenden Effekt
- Hilft, die Haut zu entstauen
- Ergänzt Gesichtsprotokolle und Aromatherapie

- Verbessert den Komfort des Kunden während der Behandlung
- Sauerstofft die Gewebe und revitalisiert sie

Indikationen

Besonders empfohlen für:

- Dehydrierte Haut
- Empfindliche oder sensibilisierte Haut
- Fahle und devitalisierte Haut
- Feuchtigkeitsprotokolle
- Beruhigende Behandlungen
- Abschluss von Gesichtsbehandlungen
- Nach Hydrodermoabrasion oder Peelings
- Aromatherapie

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei:

- Aktiven Hautinfektionen
- Offenen Wunden
- Starker Reizung
- Allergie gegen die verwendeten Wirkstoffe
- Aktiven dermatologischen Erkrankungen ohne fachliche Beurteilung

Anwendungsprotokoll

Vorbereitung

- Haut vorher reinigen
- Den Behälter je nach Protokoll mit geeigneter kosmetischer Lösung, Toner oder destilliertem Wasser füllen

Arbeitstechnik

- Einen Abstand von etwa 15–20 cm zum Gesicht einhalten
- Gleichmäßig über den gesamten behandelten Bereich zerstäuben
- Sanfte und kontinuierliche Bewegungen ausführen
- Direkten Kontakt mit Schleimhäuten und Augen vermeiden

Kann verwendet werden:

- Während des Protokolls, um Frische zu spenden
- Nach Gerätetechniken, um zu beruhigen und zu hydratisieren
- Als letzter Schritt der Behandlung

Empfohlene Zeit

 3–5 Minuten

Kann je nach Bedarf des Protokolls wiederholt werden.

Professionelle Empfehlungen

- Mit Zerstäubung kompatible kosmetische Lösungen verwenden
- Den Behälter nach jeder Verwendung reinigen und desinfizieren
- Zu dichte oder ölige Produkte vermeiden
- Kann mit Hydrodermoabrasion, Ultraschall, Ultraschallpeeling und Kältehammer kombiniert werden

Die Haut erscheint unmittelbar:

- Frischer und revitalisiert
- Hydriert und strahlend
- Rötungen und Empfindlichkeit beruhigt
- Angenehmer und besser mit Sauerstoff versorgt
- Mit gesundem und ebenmäßigem Erscheinungsbild

