
Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid,
España
Tel: 0034 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com

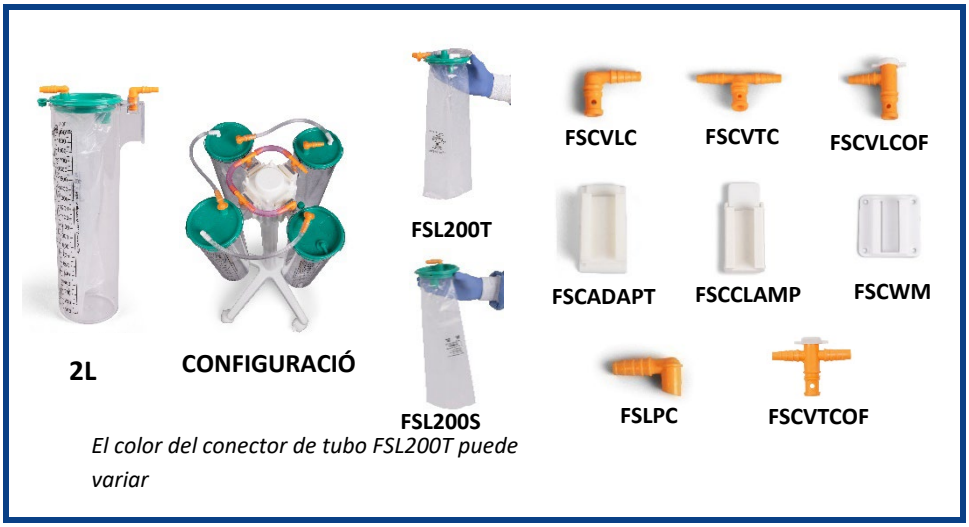

El color del conector de tubo FSL200T puede variar

Ficha técnica

Sistema de aspiración MED-FLEX

MED-FLEX es un sistema de aspiración cerrado con un recipiente reutilizable y bolsas de un solo uso para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración.

Referencias

1) **Bolsa desechable MED-FLEX**
   a) MED-FLEX 2L Bolsa de aspiración con filtro: **FSL200S**
   b) MED-FLEX 2L Bolsa de aspiración sin filtro: **FSL200T**
   c) Accesorios MED-FLEX: **FSLPC**

2) **Herraje reutilizable MED-FLEX**
   a) Canister exterior MED-FLEX 2L: **FSC2000**
   b) Conectores de vacío MED-FLEX: **FSCVLC, FSCVLCOF, FSCVTC, FSCVTCOF**
   c) Adaptador y soporte MED-FLEX: **FSCADAPT, FSCCLAMP, FSCWM**

Más información en la parte de Descripción

Descripción

1) **Bolsa desechable MED-FLEX**

Las bolsas MED-FLEX son de un solo uso y se adaptan tanto a configuraciones individuales como en serie:

a)  FSL200S	**FSL200S** : Bolsa de aspiración 2L con filtro MED-FLEX Para una sola configuración.
b)  FSL200T	**FSL200T** : Bolsa de aspiración 2L sin filtro MED-FLEX y con tubo en tándem (para montaje en serie) en combinación con FSL200S.
c)  FSLPC	**FSLPC** : Conector en L para pacientes MED-FLEX Conecta la manga al tubo del paciente evitando que se retuerza. Disponible por separado o con la bolsa **FSL200S**.

Número de documento: EU1-00004-F-000 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 8

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

FSL200S MED-FLEX Bolsa con filtro se compone de:

- Una bolsa flexible translúcida para una lectura más precisa del volumen
- Una tapa verde (sellada a la bolsa) con 2 puertos:



1. **PUERTO DE VACÍO:** Se integra directamente en la tapa y se conecta al vacío procedente del canister. Para proteger la fuente de vacío de la contaminación, esta bolsa está construida con un filtro hidrófobo (con un 99,99% de BFE) para evitar cualquier líquido aerosolizado, micropartículas y fluidos generados por la aspiración.
2. **Puerto del paciente** Permite la conexión del tubo del paciente o del tubo de la bolsa sin filtro (FSL200T) en configuraciones en tándem. El puerto del paciente está equipado con una válvula antirreflujo que impide el reflujo de líquidos y aerosoles al desconectar el tubo del paciente. La tapa viene con un conector en L preconectado para el paciente (FSLPC).
   La tapa contiene un tapón que se utiliza para cerrar el puerto del paciente al final del uso.

Cada bolsa tiene 2 asas para facilitar su extracción.

Bolsa sin filtro MED-FLEX FSL200T se compone de:



- Una bolsa flexible translúcida para lecturas de volumen más precisas.
- Una tapa verde (sellada a la bolsa) con un puerto y un tubo:

1. **Puerto del paciente** Permite la conexión del tubo del paciente o del tubo de la bolsa sin filtro (FSL200T). El puerto del paciente está equipado con una válvula antirreflujo que impide el reflujo de líquidos y aerosoles al desconectar el tubo del paciente.
2. **UN TUBO:** El tubo sellado a la bolsa permite que el fluido pase de una bolsa a otra, lo que aumenta la capacidad de recogida.

Cada bolsa tiene 2 asas para facilitar su extracción.

2) Herraje reutilizable MED-FLEX

a) Canister exterior MED-FLEX 2L: **FSC2000**

El canister exterior de MED-FLEX se compone de:




A. Un recipiente transparente con graduaciones correspondientes al volumen de líquidos recogidos en la bolsa desechable MED-FLEX.
B. Un soporte corto y transparente para pared o carro móvil.
C. Un conector en L (FSCVLC) preinsertado en la parte posterior del recipiente para conectar al tubo de vacío y que puede intercambiarse con otro conector de vacío (consulte la sección Conectores de vacío MED-FLEX).

b) Conectores de vacío MED-FLEX: **FSCVLC, FSCVLCOF, FSCVTC, FSCVTCOF**

 **FSCVLC**	**FSCVLC**: Conector en L de vacío MED-FLEX El canister exterior de MED-FLEX viene con un conector en L de vacío insertado que conecta el bote exterior al tubo de vacío. Este conector en L de vacío puede sustituirse por otro conector de vacío en función de las necesidades.

Número de documento: EU1-00004-F-000 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 8

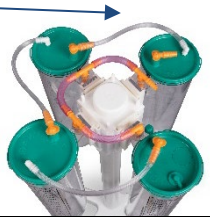 **FSCVTC**	**FSCVTC**: Conector en T de vacío MED-FLEX El conector en T de vacío se utiliza en configuraciones en serie : 
 **FSCVLCOF**	**FSCVLCOF**: Conector en L de vacío MED-FLEX con válvula ON/OFF para control de vacío El conector en L de vacío con válvula ON/OFF se utiliza para controlar el vacío en una única configuración.
 **FSCVTCOF**	**FSCVTCOF** : Conector en T de vacío MED-FLEX con válvula ON/OFF para control de vacío El conector en T de vacío con válvula ON/OFF se utiliza para controlar el vacío en una configuración en serie.

c) Adaptador y soporte MED-FLEX: **FSCADAPT, FSCCLAMP, FSCWM**

 FSCADAPT	**FSCADAPT:** Adaptador MED-FLEX, compatible con los carros Medline Permite la compatibilidad entre el sistema de aspiración MED-FLEX y los carros Medline.
 FSCCLAMP	**FSCCLAMP** : Garra de riel MED-FLEX Permite una única configuración simple a riel.
 FSCWM	**FSCWM** : Soporte de pared MED-FLEX Permite una única configuración simple a pared

Materiales principales

Referencia	Materiales
FSC2000	Policarbonato
FSL200S	Polietileno de baja densidad (Bolsa transparente), Polietileno de alta densidad + baja densidad (Tapa verde), PE+Fibra de vidrio (Filtro), Elastómero termoplástico (Válvula de reflujo)

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-000 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 8

FSL200T	Polietileno de baja densidad (Bolsa transparente), Polietileno de alta densidad + baja densidad (Tapa verde), Elastómero termoplástico (Válvula de reflujo)
FSCVLC	Polietileno
FSCVLCOF	Polietileno
FSCVTC	Polietileno
FSCVTCOF	Polietileno
FSCADAPT	Plástico
FSCCLAMP	Policarbonato - Acrilonitrilo butadieno estireno
FSCWM	Policarbonato - Acrilonitrilo butadieno estireno
FSLPC	Polietileno

Cantidad por caja

Referencia	Cantidad por caja	Envasado
FSC2000	12	**Envase**
FSL200S	100	2 cajas interiores de 50 bolsas. Cada bolsa se dobla con un elástico
FSL200T	100	2 cajas interiores de 50 bolsas. Cada bolsa se dobla con un elástico
FSCVLC	50	Bolsa de tipo solapa
FSCVLCOF	50	Bolsa de tipo solapa
FSCVTC	50	Bolsa de tipo solapa
FSCVTCOF	50	Bolsa de tipo solapa
FSCADAPT	50	Bolsa de tipo solapa
FSCCLAMP	50	**Envase**
FSCWM	20	Bolsa de tipo solapa
FSLPC	500	Bolsa de tipo solapa

Volumen, número de lote y fecha de caducidad impresos en la bolsa transparente

Envasado

Ver tabla anterior

Fabricante legal

Pergo Medikal ve ilaç Sanayi A.S.
Buca OSB Mah. 2/20 Sok. BEGOS SIT. No:9
Buca izmir/Turquía – EN ISO 13485

Normativa

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios
Clase: I no estéril

- Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.



Libre de látex

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

TDS_MED-FLEX_ES02

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-000 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 8