Medline International Iberia S.L.U.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
Madrid
España
Tel.: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



Ficha técnica

Sorbaview® 2000

Referencia(s)

Referencia	Ancho (cm)	Largo (cm)	Usos recomendados
SV15XT	5,08	4,45	Pediátrica/arterial Intravenosa periférica
SV30N2XT	6,35	7,6	Pediátrica/arterial Intravenosa periférica
SV30NXT	6,35	7,62	Pediátrica/arterial Intravenosa periférica
SV30VST	6,35	7,62	Pediátrica/arterial Intravenosa periférica
SV30XT	6,35	7,62	Pediátrica/arterial Intravenosa periférica
SV40XT	9,53	12,70	PICC/subclavia Reservorio / Puerto implantado Diálisis
SV46XT (solo apósito)	10,16	10,16	Reservorio / Puerto implantado
SV48VXT* (solo apósito)	9,53	19,05	Epidural
SV55XT*	11,43	11,43	Reservorio / Puerto implantado Subclavia
SV80FST* (incluye tira adhesiva)	12,70	16,51	Epidural
SV80XT* (solo apósito)	12,70	16,51	Epidural


Descripción

SorbaView® 2000 es un apósito con film transparente y muy permeable que cuenta con un innovador diseño multicapa y adhesivo de grado médico apto para el contacto con la piel.
En primer lugar, la almohadilla no adherente ayuda a mantener seco el punto de inserción del catéter, al absorber la humedad de la piel a través de la almohadilla fibrosa y expulsarla a la capa externa de tejido-no-tejido. La almohadilla, muy absorbente, está fenestrada para formar una abertura en el apósito. Además, sirve como capa protectora para que los pacientes se sientan más cómodos con catéteres voluminosos.

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9

	En segundo lugar, la almohadilla fenestrada está cubierta y rodeada por una membrana de poliuretano transparente. Esta película delgada y semipermeable constituye una barrera de protección firme frente a contaminantes y líquidos externos y es visualmente transparente, ideal para su uso para el cuidado de la zona de inserción del catéter. La capa adhesiva y fenestrada de tejido-no-tejido completa los materiales de este apósito multicapa único. Esta cómoda capa externa es perfecta para proteger de lesiones la zona alrededor de la zona de inserción del catéter y fijar los accesos vasculares a la piel del paciente. Vida útil: 5 años
Materiales principales	Revestimiento: Papel siliconado Almohadilla: Almohadilla absorbente; celulosa hilada con disolventes, 1,1 - 1,9 mm. Adhesivo: Adhesivo de poliacrilato (no sensibilizante) Film: película de poliuretano, 0,02 mm. Tela: Tejido no tejido, 0,5 mm.
Cantidad por caja	100 unidades por caja, 2 dispensadoras de 50 unidades/* 50 unidades por caja
Envasado	Bolsa de tipo solapa Una caja de cartón contiene todas las unidades
Fabricante legal	Centurion Medical Products, LP (una empresa de Medline) EN ISO 13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido Clase: I estéril •Consulte el etiquetado completo antes de utilizar el producto.

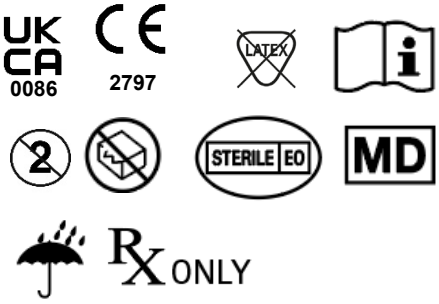

© 2023 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados
TDS_Sorbaview 2000_ES04

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de soporte

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical Revisión: 9