MEDLINE

REF S3500P REF S3513P
REF S3510P REF S3581P
REF S3540P

en Surgical Gown, with fluid proof reinforcement

de OP-Mantel mit flüssigkeitsdichter Verstärkung

fr Casaque de Chirurgie, avec renfort imperméable

nl Operatiejas, PE verstevigd

it Camice Chirurgico con rinforzo impervio

es Bata quirúrgica con refuerzo, resistente a fluídos

pt Bata Cirúrgica, com reforço resistente a fluidos

sv Operationsrock, plastförstärkt

fi Leikkaustakki, nestettä läpäisemätön

da Operationskittel plastforstærket

no Operasjonsfrakk plastforsterket

el Χειρουργική ρόμπα, με ενίσχυση κατά των υγρών

cs Operační plášť, Zesílený fólií- dlouhé


pl Fartuch chirurgiczny, z wodoodpornym wzmocnieniem

sl Kirurška halja z ojačitvijo, ki je odporna na tekočino

ro Halat chirurgical cu ranforsare impermeabila

hu Operációs köpeny folyadékálló megerősítéssel

sk Chirurgický Plášť s Výstužou Odolnou voči Tekutinám

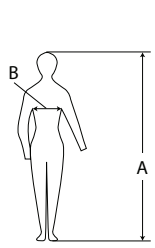

REF			A	B
S3500P	S/M	115 cm	140-175 cm	75-100 cm
S3510P	L	120 cm	160-185 cm	85-110 cm
S3540P	XL	140 cm	165-190cm	95-120 cm
S3513P	XLL	150 cm	170-195 cm	100-130 cm
S3581P	2XLL	170 cm	180-210 cm	110-135 cm

EU declaration of conformity available on: www.medline.eu/document-library

CE 2797 Medical Device class I sterile under Regulation 2017/745,
PPE category III under Regulation (EU) 2016/425,
certified by BSI Group The Netherlands B.V. 1066 EP, Amsterdam, Netherlands.

Medline International France SAS, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France
Distributed in Australia by: Medline International, Two Australia Pty. Ltd., Sydney, Australia

UK CA 0086 **UK approved body:** BSI Assurance UK Ltd, MK5 8PP, UK
UK representative and importer in UK: Medline Industries Ltd, WA4 6HL, UK

CH REP **CH Rep and importer:** Medline International
Switzerland SARL, c/o MN & Associés SA,
1 Place de Longemalle, 1204 Genève, Switzerland

LAB190419 - 2024.02

en Personal Protective Equipment of Complex Design Category III, in compliance with Regulation (EU) 2016/425 – Type PB [4]-B and PPE Regulation (EU) 2016/425 as amended to apply in GB. Only the gown's reinforced areas protect against chemicals and infective agents; Class I Medical Device in compliance Regulation 2017/745 and UK Medical device regulation.
Information on performance level is available in the corresponding Technical Data Sheet. Compliance with EN 13795-1 High Performance in reinforced area only.
The shelf life is given on the product label. The product is not known to cause skin reactions.
These gowns are made from materials with good breathability properties to reduce heat stresses and designed for comfortability.
Storage conditions: 5 – 30°C.
Precautions and warnings: For single use only, Do not reuse. Flammable material. Keep away from fire.
Reuse of single use devices creates a potential risk for the patient or user. It may cause contamination and/or impairment of function; which may lead to injury, illness and/or death of a patient.
If a serious incident has occurred in relation to the device, it should be reported to Medline and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
Disposal:
The used protective gowns have to be disposed as hazardous waste. Special marked containers have to be used. Local regulations must be considered.
Gowns must remain in their primary packaging until required.
Declaration of conformity: www.medline.eu/document-library

de PSA der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 - Typ Type PB [4]-B. Nur die verstärkten Bereiche des Mantels bieten Schutz vor Chemikalien und Krankheitserregern. Medizinprodukt der Klasse 1 konform gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.
Informationen über die Leistungsdaten finden Sie im entsprechenden Technischen Datenblatt. Konform gemäß EN13795-1 ausschließlich im verstärkten Bereich.
Die Haltbarkeit ist auf dem Produktetikett angegeben. Es ist nicht bekannt, dass durch das Produkt Hautreaktionen ausgelöst werden.
Diese Mäntel sind aus Materialien hergestellt, welche atmungsaktiv sind, die Hitzestau reduzieren und hohen Komfort gewährleisten.
Lagerbedingungen: 5 - 30 °C.
Vorsichts- und warnhinweise: Nur für den einmaligen Gebrauch, nicht wiederverwenden. Brennbares Material. Von Feuer fern halten.
Das Wiederverwenden von zur einmaligen Verwendung bestimmten Produkten stellt ein potentielles Risiko für Patient und Anwender dar. Es kann zu einer Kontamination und/oder Beeinträchtigung der Funktion kommen, was zu Verletzungen, Krankheit und/oder Tod eines Patienten führen kann.
Wenn ein schwerwiegender Vorfall in Bezug auf das Produkt aufgetreten ist, sollte dies Medline und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und / oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.
Entsorgung:
Die verwendeten Schutzmäntel müssen als Sondermüll entsorgt werden. Spezielle Behälter müssen zur Entsorgung verwendet werden. Die örtlichen Entsorgungsvorschriften müssen beachtet werden.
Die Mäntel müssen bis zur Verwendung in der Primärverpackung bleiben.
Konformitätserklärung: www.medline.eu/document-library

fr Équipement de protection individuelle de catégorie III, conforme au règlement (UE) 2016/425 – Type Type PB [4]-B. Seules les zones renforcées de la casaque protègent contre les agents chimiques et les agents infectieux; Dispositif de Classe I stérile conforme à la Réglementation des Dispositifs Médicaux (UE) 2017/745.
Des informations concernant le niveau de performance sont disponibles sur la fiche technique correspondante. En conformité avec la norme EN 13795-1 Haute Performance uniquement sur la zone de renfort.
La limite d'utilisation est mentionnée sur l'étiquette produit. Le produit n'est pas connu pour être à l'origine de réaction cutanée.
Les casaques sont conçues à partir de matières respirantes afin de limiter la sensation de chaleur et conçues pour offrir un bon niveau de confort.
Conditions de stockage : 5 – 30°C.
Précautions et avertissements : Pour usage unique seulement, ne pas réutiliser. Matière inflammable, ne pas approcher d'une flamme.
La réutilisation de dispositifs à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. Ils peuvent être contaminés et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner blessures, maladies et/ou mort du patient.
Si un incident grave est survenu en lien avec le dispositif, il doit être reporté à Medline et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
Elimination des déchets :
Les casaques de protection usagées doivent être éliminées avec les produits contaminés. Utiliser les poubelles identifiées et prévues à cet effet. Les réglementations locales doivent être également appliquées.
Les casaques doivent rester dans leur emballage primaire jusqu'à utilisation.
Déclaration de conformité: www.medline.eu/document-library

nl Persoonlijke beschermende uitrusting, complex van aard van Categorie III, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 – Type Type PB [4]-B. Alleen de verstevigde zones van de jas beschermen tegen chemische stoffen en besmettelijke middelen; In overeenstemming met Richtlijn Medische Hulpmiddelen (EU) 2017/745. Classe I Medisch hulpmiddel.
Informatie over het prestatieniveau is beschikbaar in de bijbehorende technische datasheet. Naleving van EN 13795-1 alleen in het versterkte gedeelte.
De houdbaarheid is aangegeven op het etiket van het product. Er zijn geen gevallen bekend van ontstaan van huidreacties bij gebruik van dit product.
Deze operatiejassen zijn gemaakt van goed ademende materialen om warmte tijdens het dragen te voorkomen en het comfort te verhogen.
Opslag condities: 5 – 30°C.
Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen: Enkel geschikt voor eenmalig gebruik, niet hergebruiken. Ontvlambaar materiaal. Weghouden bij vuur.
Wanneer voor eenmalig gebruik bestemde hulpmiddelen opnieuw worden gebruikt, kan dit risico voor de patiënt of gebruiker opleveren. Dit kan verontreiniging veroorzaken en/of de werking aantasten, hetgeen letsel, ziekte en/of overlijden van de patiënt tot gevolg kan hebben. Als zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel, moet dit worden gemeld aan Medline en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd.
Afvoeren:
De gebruikte beschermingsjassen moeten behandeld worden als gecontamineerd afval. Speciaal daarvoor bedoelde containers dienen gebruikt te worden. Wettelijke regelgeving moet in acht worden genomen. De jassen moeten in hun originele verpakking blijven tot gebruik.
Conformiteitsverklaring: www.medline.eu/document-library

it Dispositivo di protezione individuale di progettazione complessa (categoria III), ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 -Type Type PB [4]-B. Solo le aree rinforzate del corpo del camice e delle braccia proteggono dalle sostanze chimiche ed infettive; Conforme alla Direttiva sui Dispositivi Medici 2017/745 (UE). Dispositivo Medico di classe I.
Informazioni sul livello di performance è disponibile nella scheda tecnica. In conformità con EN 13795-1 HP- Alto Livello di Protezione, solamente nelle aree rinforzate.
La data di scadenza è indicata sull'etichetta del prodotto. Il prodotto non è noto causare irritazioni alla pelle.
Questi camici sono confezionati per essere confortevoli e realizzati con materiali traspiranti per ridurre ed attenuare la sensazione di calore.
Condizioni di stoccaggio: 5 - 30 °C.
Precauzioni e avvertenze: Dipostivo Monouso.Non risterilizzabile.Materiale infiammabile. Mantenere lontano da forme di calore.
Il riutilizzo di dispositivi monouso determina un rischio potenziale per il paziente o l'utilizzatore. Può causare contaminazione e/o compromissione della funzione, con conseguenti lesioni, malattie e/o decesso del paziente.
Se si verifica un grave incidente in relazione al dispositivo, deve essere segnalato a Medline ed all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e / o il paziente è stabilito.
Smaltimento:
I camici DPI III devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi usando gli appositi contenitori seguendo il regolamento vigente.
I camici devono rimanere nel loro confezionamento originale fino al loro utilizzo.
Dichiarazione di conformità: www.medline.eu/document-library

es Equipo de protección individual de diseño complejo de categoría III según el Reglamento (UE) 2016/425 – Tipo Type PB [4]-B. Sólo las áreas reforzadas de las batas protegen frente a químicos y agentes infecciosos; De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de Productos Sanitarios. Producto Sanitario Clase I.
La información sobre el nivel de rendimiento está disponible en la Ficha Técnica correspondiente. Conformidad con EN 13795-1 Alto rendimiento solo en áreas reforzadas.
La vida útil se indica en la etiqueta del producto. No se tiene conocimiento de que el producto cause reacciones alérgicas.
Estas batas están fabricadas con materiales con buenas propiedades de transpirabilidad para reducir el estrés térmico y es diseñado para la comodidad.
Condiciones de almacenamiento: 5 – 30°C.
Precauciones y advertencias: Para un solo uso, no reutilizar. Material inflamable. Mantener alejado del fuego.
Reutilizar un producto de un solo uso crea un riesgo potencial para el paciente o usuario. Puede causar contaminación y / o deterioro de la función; que puede conducir a lesión, enfermedad y / o muerte de un paciente.
Si se ha producido un incidente grave en relación con el producto, debe notificarse a Medline y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y / o el paciente.
Desechable:
Las batas de protección utilizadas tienen que ser eliminadas como residuos peligrosos. Tienen que ser utilizados contenedores específicamente marcados. Las regulaciones locales tienen que ser consideradas.
Las batas deben permanecer en sus envases originarios hasta que se necesiten.
Declaratión de conformidad: www.medline.eu/document-library

pt Equipamento de proteção pessoal da Categoria III: De design complexo, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 – Tipo Type PB [4]-B. Somente as zonas reforçadas das batas protegem contra químicos e agentes infecciosos; Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo aos Dispositivos Médicos. Dispositivo Médico Classe I.
Informações sobre o nível de desempenho estão disponíveis na ficha técnica correspondente. Conformidade com EN 13795-1 apenas em área reforçada.
A data de validade está indicada na etiqueta do produto. Não há conecimento que o produto caude alergias cutâneas.
Estas batas são fabricadas com materias que permitem uma boa transpirabilidade do produto reduzindo o desconforto causado pelo calor e um desenhado adequado para um melhor conforto.
Condições de Armanezamento: 5 – 30°C.
Precauções e avisos: Uso único. Não reutilizável. Material inflamável. Manter afastado do fogo.
A reutilização de dispositivos de uso único cria um risco potencial para o paciente ou usuário. Pode causar contaminação e / ou comprometimento da função; o que pode levar a lesões, doenças e / ou morte de um paciente.
Se ocorrer um incidente grave em relação ao dispositivo, este deve ser reportado à Medline e à autoridade de saúde competente do Estado em que o usuário e / ou o paciente se encontram.
Descartar:
As batas utilizadas devem ser eliminadas como residuo perigoso e o local onde depositadas deve estar devidamente identificado. Deverá ser respeitada a regulamentação legal de residuos.
As batas devem permancer nas suas embalagens originais até ser utilizadas.
Declaração de conformidade: www.medline.eu/document-library

sv Personlig skyddsutrustning med komplex design kategori III, överensstämmer med förordning (EU) 2016/425 – Typ Type PB [4]-B och PPE-förordning (EU) 2016/425, införd i Storbritanniens lagstiftning med ändringar.
Endast rockens förstärkta områden skyddar mot kemikalier och smittämnen; Medicinteknisk produkt Klass I i överensstämmelse med 2017/745 (EU) och UK Medical Device Regulation.
Information om prestanda finns tillgänglig i motsvarande tekniska datablad.
Uppfyller kraven enligt EN 13795-1, hög prestanda endast i förstärkta områden.
Utgångsdatum anges på produktetiketten. Inga kända hudreaktioner.
Rockarna är tillverkade av material med goda andningsegenskaper för att minska värmestress och är utformade för att vara bekväma att bära.
Förvaring: 5 – 30 °C.
Försiktighet och varningar: Endast avsedd för engångsbruk, får inte återanvändas. Lättantändligt material. Undvik öppen låga.
Återanvändning av produkter för engångsbruk medför en potentiell risk för patienten och/eller användaren. Återanvändning kan orsaka kontaminering och/eller försämrad funktion, vilket kan leda till skada, sjukdom och/eller död för patienten.
Om en allvarlig incident som relaterar till enheten inträffar ska den rapporteras till Medline och den relevanta myndigheten i medlemsstaten där användaren och/eller patienten finns.
Kassering:
Använda operationsrockar ska kasseras som farligt avfall. Använd för ändamålet märkta behållare.
Följ lokala bestämmelser.
Rockarna ska ligga kvar i sin innerförpackning till de ska användas.
Deklaration om överensstämmelse: www.medline.eu/document-library

no Personlig vernestyrr har sammensatt utformet kategori III, i samsvar med forordning (EU) 2016/425 – type Type PB [4]-B. Det er kun rakkens forsterkede områder som beskytter mot kjemikalier og smittefarlige midler; Medisinteknisk produkt klasse I i samsvar med 2017/745 (EU) og UK Medical Device Regulation.
Informasjon om ytelsesnivå er tilgjengelig i produktdatabladet. I henhold til standard EN 13795-1 HP, kun forsterkede områder.
Utløpsdatoen er oppgitt på produktetiketten. Produktet er ikke kjent å forårsake hudreaksjoner.
Disse frakkene er laget av materialer som tillater god pustegenskaper for å redusere varmebelastningen og er utformet for komfort.
Oppbevaringsforhold: 5–30 °C.
Forholdsregler og advarsler: Kun til engangsbruk. Brennbart materiale. Holdes unna åpne flammer.
Gjenbruk av enheter som er ment for engangsbruk, skaper en potensiell risiko for pasienten eller brukeren. Det kan føre til kontaminering og/eller redusert funksjonalitet, noe som kan føre til skade, sykdom og/eller dødfall.
Dersom en alvorlig hendelse har skjedd i forhold til enheten, skal det rapporteres til Medline og myndighetene der brukeren og / eller pasienten befinner seg.
Engasjø:
Brukte vernefrakker skal kastes som farlig avfall. Spesielt merkede beholdere skal brukes. Lokale forskrifter må overholdes.
Frakker må oppbevares i primæremballasjen frem til bruk.
Konformitetserklæring: www.medline.eu/document-library

Konformitetserklæring: www.medline.eu/document-library

el Μέσα Ατομικής Προστασίας Σύνθετου Σχεδιασμού Κατηγορίας III, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 – Τύπος Type PB [4]-B και τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 όπως τροποποιήθηκε για να ισχύσει στη Μεγάλη Βρετανία. Μόνο οι ενισχυμένες περιοχές της ποδιάς προστατεύουν από χημικές ουσίες και μολυσματικούς παράγοντες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας I σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/745 και τον Κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο απόδοσης διατίθενται στο αντίστοιχο δελτίο τεχνικών δεδομένων. Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 13795-1 Υψηλή απόδοση με το πρότυπο μόνο σε ενισχυμένη περιοχή.
Η διάρκεια ζωής αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι γνωστό ότι προκαλεί δερματικές αντιδράσεις.
Αυτές οι ρόμπες έχουν κατασκευαστεί από υλικά με καλές ιδιότητες αντοχής για τη μείωση των θερμικών καταπονήσεων και έχουν σχεδιαστεί για άνεση.
Συνθήκες αποθήκευσης: 5 – 30°C.
Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις: Μόνο μιας χρήσης. Μην επαναχρησιμοποιείτε. Εύφλεκτο υλικό. Κρατήστε το μακριά από τη φωτιά.
Η επαναχρησιμοποίηση αποκλειστικά μιας χρήσης συσκευών προϊόντων μιας χρήσης δημιουργεί συνήθως κίνδυνο για τον ασθενή ή τον χρήστη. Μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή/και βλάβη της λειτουργίας, κάτι που μπορεί σε τελική ανάλυση να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια και/ή θάνατο ασθενούς.
Εάν έχει συμβεί σοβαρό περιστατικό σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν, θα πρέπει να αναφερθεί στη Medline και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης και/ή ο ασθενής.
Απόρριψη:
Οι χρησιμοποιημένες προστατευτικές ρόμπες πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κάδοι με ειδική σήμανση. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικοί κανονισμοί.
Οι ρόμπες πρέπει να παραμένουν στην αρχική συσκευασία τους μέχρι να απαιτηθούν.
Δήλωση συμμόρφωσης: www.medline.eu/document-library

cs Osobní ochranné prostředky kompexního designu kategorie III, v souladu se nařízení (EU) 2016/425 – typ PB [4]-B Protí chemikáliím a infekčním činitelům pouze zesílené oblasti pláště, Ve shodě se směrnicí o zdravotnických prostředcích 2017/745 (EU). Zdravotnický prostředek třídy I.
Informace o úrovni výkonu jsou k dispozici v odpovídajícím technickém listu. Soulad s normou EN 13795-1 Vysoký výkon pouze v zesílené oblasti.
Doba použitelnosti je uvedena na štítku výrobku. Není známo, že by výrobek způsoboval kožní reakce.
Tyto pláště jsou vyrobeny z prodyšných materiálů za účelem snížení náporů horka a jsou navrženy tak, aby byly pohodlné.
Podmínky skladování: 5–30 °C.
Upozornění a varování: Pouze k jednorázovému použití, nepoužívejte opakovaně. Hořlavý materiál. Chraňte před otevřeným ohněm.
Opětovné použití jednorázových prostředků je spojeno s potenciálním rizikem pro pacienta nebo uživatele. Může dojít ke kontaminaci a/nebo narušení funkce s následným zraněním, nemocí a/nebo úmrtím pacienta.
Pokud v souvislosti s prostředkem dojde k závažné příhodě, musí být tato příhoda zaznamenána do databáze Medline a oznámena příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel nebo pacient usazen.
Likvidace:
Použité ochranné pláště musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Musí být používány speciálně označené nádoby. Musí být dodržovány místní předpisy.
Oblečení musí být používány, musí zůstat v primárním obalu.
Prohlášení o shodě : www.medline.eu/document-library

pl Srodki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, kategoria III, zgodnie z rozporządzenia (UE) 2016/425 - Typ Type PB [4]-B. Jedynie wzmocnione obszary fartucha chronią przed substancjami chemicznymi i czynnikami zakaźnymi; Wyrób medyczny klasy I zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745.
Informacje w temat poziomu wydajności są dostępne w odpowiedniej karcie danych technicznych.
Zgodność z normą EN 13795-1 tylko w obszarze wzmocnionym.
Okres przydatności do użycia jest podany w etykiecie produktu. Nie zna się przypadków aby produkt był przyczyną reakcji skórnych. Fartuchy wykonane są z materiałów o wysokiej oddychalności w celu zmniejszenia zakażnym; Wyrób medyczny klasy I zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745.
Warunki przechowywania: 5 - 30 ° C.
Przestrogi i ostrzeżenia: Do jednorazowego użytku. Materiał łatwopalny. Trzymać zdala od źródeł ognia.
Ponowne użycie urządzeń przeznaczonych do jednorazowego użytku może stwarzać potencjalne zagrożenie dla pacjenta lub użytkownika. Może spowodować zanieczyszczenie i/lub pogorszenie działania urządzenia, co może prowadzić do obrażeń ciała, choroby i/lub śmierci pacjenta.
Jeśli w związku z wyrobem będzie miał miejsce poważny incydent, należy zgłosić go firmie Medline oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma siedzibę.
Jednorazowe:
Zużyte fartuchy muszą być przetworzywane w oryginalnym opakowaniu do czasu użycia.
Deklaracja zgodności: www.medline.eu/document-library

sl Oseba zaščitna oprema kompleksne zasnove kategorije III, v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 – tip PB [4]-B in Uredbo o osebni zaščitni opremi (EU) 2016/425, kot je bila vključena v zakonodajo Združenega kraljestva in spremenjena. Le ojačani deli halje ščitijo pred kemikalijami in povzročitelji okužb. Medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo (EU) 2017/745.
Informacije o stopnji zmogljivosti so na voljo v ustreznem tehničnem listu. Skladnost s visoko zmogljivostjo EN 13795-1 samo na ojačanih delih.
Rok uporabnosti je naveden na etiketi izdelka. Ni znano, da bi izdelek povzročal kožne reakcije.
Te halje so narejene iz materialov z dobro zračnostjo za zmanjšanje toplotnih obremenitev in oblikovane za udobje.
Pogoji shranjevanja: 5 – 30 °C.
Previdnostni ukrepi in opozorila: Samo za enkratno uporabo, ne uporabljajte ponovno. Vnetljiv material. Hranite proč od ognja.
Ponovna uporaba zdravstvenih pripomočkov za enkratno uporabo ustvarja potencialno tveganje za pacienta ali uporabnika. Lahko pride do kontaminacije in/ali poslabšanja delovanja in posledično poškodbe, bolezni in/ali smrti pacienta.
O vsakem resnem zapletu, do katerega ima uporabnik in/ali pacient ali lahko pride, je treba obvestiti Medline in pristojni organ države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.
Odstranjevanje:
Uporabljene zaščitne halje je treba odstraniti kot nevaren odpadek. Uporabiti je treba posebne označene vsebnike. Upoštevati je treba lokalne predpise.
Halje morajo ostati v primarni embalaži, dokler jih ne potrebujete.
Izjava o skladnosti: www.medline.eu/document-library

ro Echipament individual de protectie cu design complex categoria III, in conformitate cu regulament (UE) 2016/425 – Tipul PB [4]-B. Numai zonele întărite ale halatului oferă protecție împotriva substanțelor chimice și a agenților infecțioși; Dispozitiv medical clasa I în conformitate cu regulamentul (UE) 2017/745.
Informații cu privire la nivelul de performanță sunt disponibile în fișa tehnică. În conformitate cu norma EN 13795-1 Performanță înaltă doar în zonele întărite.
Termenul de valabilitate este indicat pe eticheta produsului. Nu se cunosc situații în care produsul să provoace reacții cutanate.
Aceste halate sunt fabricate din materiale care respiră foarte bine pentru a reduce acumulările de căldură și sunt concepute pentru a asigura confortul.
Condiții de păstrare: 5 – 30 °C.
Atenționări și Precauții: De unică folosință, A nu se reutiliza. Material inflamabil. A se feri de surse de foc. Reutilizarea dispozitivelor de unică folosință expun pacientul sau utilizatorul unor potențiale riscuri. Se poate produce contaminarea și/sau afectarea funcției, ceea ce poate conduce la vătămarea, îmbolnăvirea și/sau decesul pacientului.
Dacă a avut loc un incident grav în legătură cu dispozitivul,acesta trebuie raportat la Medline și la autoritatea competentă din statul membru în care este stabilit utilizatorul și / sau pacientul.
Înlăturare:
Halatele de protecție uzate trebuie eliminate ca deșeuri periculoase. Este necesară utilizarea containerelor special marcate. Trebuie să fiverifi cont de reglementările locale.
Hainele trebuie păstrate în ambalajul original până la utilizare.
Declarația de conformitate: www.medline.eu/document-library

hu Perzonlig vernetsztyr har sammensatt utformingg kategori III, i samsvar med forordning (EU) 2016/425 – typ PB [4]-B och PPE-förordning (EU) 2016/425, införd i Storbritannien lagstiftning med ändringar.
Endast förstärkta områden skyddar mot kemikalier och smittämnen; Medicinteknisk produkt Klass I i överensstämmelse med 2017/745 (EU) och UK Medical Device Regulation.
Information om prestanda finns tillgänglig i motsvarande tekniska datablad.
Uppfyller kraven enligt EN 13795-1, hög prestanda endast i förstärkta områden.
Utgångsdatum anges på produktetiketten. Inga kända hudreaktioner.
Rockarna är tillverkade av material med goda andningsegenskaper för att minska värmestress och är utformade för att vara bekväma att bära.
Förvaring: 5 – 30 °C.
Försiktighet och varningar: Endast avsedd för engångsbruk, får inte återanvändas. Lättantändligt material. Undvik öppen låga.
Återanvändning av produkter för engångsbruk medför en potentiell risk för patienten och/eller användaren. Återanvändning kan orsaka kontaminering och/eller försämrad funktion, vilket kan leda till skada, sjukdom och/eller död för patienten.
Om en allvarlig incident som relaterar till enheten inträffar ska den rapporteras till Medline och den relevanta myndigheten i medlemsstaten där användaren och/eller patienten finns.
Kassering:
Använda operationsrockar ska kasseras som farligt avfall. Använd för ändamålet märkta behållare.
Följ lokala bestämmelser.
Rockarna ska ligga kvar i sin innerförpackning till de ska användas.
Deklaration om överensstämmelse: www.medline.eu/document-library

sk Osobné ochranné prostriedky kompletnej konštrukcnej kategórie III v súlade s nariadením (EÚ) 2016/425 - typ PB [4]-B a nariadením o osobných ochranných prostriedkoch (EÚ) 2016/425 v znení neskorších predpisov Spojeného kráľovstva. Iba vystužené časti plášťa chránia pred chemikáliami a infekčnými látkami; V súlade so Smernicou o zdravotníckych pomôckach 2017/745 (EÚ). Zdravotnícka pomôcka triedy I.
Spojeného kráľovstva o zdravotníckych pomôckach.Informácie o úrovni spôsobilosti sú k dispozícii v príslušnom technickom liste. Súlad s normou EN 13795-1 Vysoká spôsobilosť len vo vystuženej oblasti.
Doba skladovania je uvedená na etikete produktu. Nie je známe, že by produkt spôsoboval kožné reakcie.
Tieto plášte sú vyrobené z materiálov s dobrými priedušnými vlastnosťami, ktoré znižujú tepelnú záťaž a sú navrhnuté tak, aby boli pohodlné.
Podmienky skladovania: 5 – 30°C.
Preventívne opatrenia a varovania: Len na jedno použitie, nepoužívajte opakovane. Horľavý materiál. Uchovávajte mimo dosahu ohňa. Opätovné použitie pomôcok na jedno použitie predstavuje potenciálne riziko pre pacienta alebo používateľa. Môže spôsobiť kontaminačnú a/alebo poškodenie funkcie, čo môže viesť k poraneniu, chorobe a/alebo smrti pacienta. Ak sa v súvislosti s pomôckou vyskytla vážna nehoda, mala by sa nahlásiť spoločnosti Medline a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.
Likvidácia:
Použité ochranné plášte sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad. Musia sa používať špeciálne označené nádoby. Je potrebné zohľadniť miestne predpisy. Plášte musia zostať v primárnom obale, kým nie sú potrebné.
Vyhlásenie o zhode: www.medline.eu/document-library

EN 14605: 2005+A1:2009
Performance requirements (only on reinforced areas)
Leistungsanforderungen (nur in den verstärkten Bereichen)
Niveau de performance (zones renforcées uniquement)
Prestatie vereisten (alleen voor de verstevigde zones)
Performance (solo nelle aree rinforzate)
Requerimientos de prestaciones (solo en áreas reforzadas)
Requesitos de desempenho (zonas reforçadas)
Prestandakrav (gäller endast förstärkta områden)
Ominaisuusvaatimukset (vain vahvistetuille alueille)
Resultatkrav (kun på forstærkede områder)
Krav til ytelse (kun for forsterkede områder)
Απαιτήσεις απόδοσης (μόνο στις ενισχυμένες περιοχές)
Požadavky na provedení (platné pouze pro zesílené oblasti)
Wymagania (tylko w obszarach wzmocnionych)
Zahteve glede zmogljivosti (samo na ojačenih delih)
Cerințe de performanță (numai în ce privește zonele întărite)
Teljesítményjellemzők (csak a megerősített területeken)
Požiadavky na spôsobilosť (len vo vystužených oblastiach)

EN 14605:2005+
A1:2009 Type [PB]-4

Test method Prüfmethode Méthode de test Test methode Test eseguiti Método de ensayo Método de ensaio Testmetod Testimenetelmä Test metode Testmetode Μέθοδος δοκιμής Zkušební metoda Metodă de testare Preizkusna metoda Metoda testowa Vizsgálati módszer Skúšobná metóda	Property Eigenschaft Propriétés Eigenschap Proprietà Propiedad Propriedades Egenskap Ominaisuus Egenskab Egenskap Ιδιότητα Vlastnost Właściwość Lastnina Proprietate Tulajdonság Vlastnosť	Performance level Leistungsstufe Niveau de performance Prestatieniveau Livello di prestazione Nivel de prestaciones Nivel de desempenho Prestanda Ominaisuustaso Ydeevne niveau Ytelsesniv Επίπεδο απόδοσης Výkonnostní stupeň Poziom odporności Stopnja zmogljivosti Nivel de performanță Teljesítményszint Úroveň spôsobilosti
ISO 12947-2	Abrasion Abrieb Résistance à l'abrasion Snelheid van beschadigen Abrasione Abrasión Abrasão Slittålighet Hankaus Slid Abrasjon Εκτριβή Odolnost proti otěru Przetarcie Abrazija Abraziune Kopás Odolnosť proti oderu	Level 4 Klasse 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Clase 4 Classe 4 Nivå 4 Luokka 4 Class 4 Klasse 4 **Επίπεδο 4** Třída 4 Klasa 4 Stopnja 4 Clasă 4 4. osztály Úroveň 4
ISO 7854-B	Flex cracking Bruchfestigkeit Résistance à la flexion Sterkte bij buigen materiaal Flex cracking Agrietamiento por flexión Fissuras por flexão Sprickbildning vid veck Taivutusmurtuma Flex krakelering Sprekker ved bøying Ράγισμα από κάμψη Odolnost proti praskání v ohybech Pękanie przy zginaniu Razpoka zaradi upogibanja Rezistență la rupere Rugalmas repedés Odolnosť proti tvoreniu trhlín pri ohýbaní	Level 4 Klasse 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Clase 4 Classe 4 Nivå 4 Luokka 4 Class 4 Klasse 4 **Επίπεδο 4** Třída 4 Klasa 4 Stopnja 4 Clasă 4 4. osztály Úroveň 4
ISO 9073-4	Trapezoidal tear Reißfestigkeit (Trapeztest) Résistance au déchirement Trapeziumvormige scheur Resistenza allo strappo trapezoidale Desgarro trapezoidal Trapezoidal tear Rivtålighet, värgående mot fiberriktningen Kiilarepeämä Trapezformet revne Trapesformet rift Τραπεζοειδής ρήξη Odolnost proti dalšímu trhání určovaná podle lichoběžníkové metody Trapezowe rozrywanie Trapezna raztrganina Rupere trapezoidală Trapéz alakú szakadás Odolnosť proti pretrhnutiu (lichobežníkovou metódou)	Level 1 Klasse 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Clase 1 Classe 1 Nivå 1 Luokka 1 Class 1 Klasse 1 **Επίπεδο 1** Třída 1 Klasa 1 Stopnja 1 Clasă 1 1. osztály Úroveň 1
ISO 13934-1	Tensile strength Zugfestigkeit Résistance à la traction Treksterkte Resistenza alla trazione Resistencia a la tracción Resistência à tração Draghållfasthet Vetolujuus Trækbrudstyrke Strekkfasthet Εφελκυσμός Pevnost v tahu Wytrzymałość na rozciąganie Natezna trdnost Rezistență la întindere Szakítószilárdság Pevnosť v ťahu	Level 1 Klasse 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Clase 1 Classe 1 Nivå 1 Luokka 1 Class 1 Klasse 1 **Επίπεδο 1** Třída 1 Klasa 1 Stopnja 1 Clasă 1 1. osztály Úroveň 1
EN 863	Puncture resistance Durchstoßfestigkeit Résistance à la perforation Bescherming tegen gaatjes Resistenza alla perforazione Resistencia a la perforación Resistência `perfuração Punktionstålighet Puhkeamiskestävyys Modstand mod huller Motstand mot punksjon Αντοχή στη διάτρηση Odolnost proti propíchnutí Odpornost proti prebadanju Odpornosć na przebicie Rezistență la străpungere Szúrásnak való ellenállás Odolnosť proti prepichnutiu	Level 1 Klasse 1 Classe 1 Classe 1 Classe 1 Clase 1 Classe 1 Nivå 1 Luokka 1 Class 1 Klasse 1 **Επίπεδο 1** Třída 1 Klasa 1 Stopnja 1 Clasă 1 1. osztály Úroveň
ISO 13935-2	Seam strength Nahtfestigkeit Résistance des coutures Sterkte van de naad Robustezza delle cuciture Fuerza en costuras Força nas zonas de costura Sömstyrka Saumalujuus Søm styrke Sømstyrke Αντοχή ραφής Pevnosť švu Wytrzymałość szwów Trdnost šivov Rezistența cusăturii Varrat erőssége Pevnosť švov	Level 3 Klasse 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Clase 3 Classe 3 Nivå 3 Luokka 3 Class 3 Klasse 3 **Επίπεδο 3** Třída 3 Klasa 3 Stopnja 3 Clasă 3 3. osztály Úroveň 3

Latex free, Latexfrei, Sans Latex, Latexvrij, Senza lattice, Sin látex, Sem látex,
Latexfri, Lateksiton, Latexfri, Lateksfri, **Χωρίς λάτεξ**, Bez Latexu, Bezlateksowe,
Brez lateksa, Fără latex, Latex mentes, Bez latexu

Do not reuse, Nicht wiederverwenden, Ne pas réutiliser, Niet geschikt voor hergebruik,
Non riutilizzare, No reutilizar, Não reutilizável, Endast för engångsbruk,
Ei saa käyttää uudelleen, Kan ikke genanvendes, Ikke til gjenbruk,
Μην επαναχρησιμοποιείτε, Nepoužívat opakovaně, Do jednorazowego użytku,
Ne uporabljajte ponovno, A nu se reutiliza, Ne használja újra, Nepoužívajte opakovane

EN 14126 (2003) + AC (2004):

EN 14126:2003
Type PB[4]-B

Test method Prüfmethode Méthode de test Test methode Test eseguiti Método de ensayo Método de ensaio Testmetod Testimenetelmä Test metode Testmetode Μέθοδος δοκιμής Zkušební metoda Metodă de testare Preizkusna metoda Metoda testowa Vizsgálati módszer Skúšobná metóda	Property Eigenschaft Propriétés Eigenschap Proprietà Propiedad Propriedades Egenskap Ominaisuus Egenskab Egenskap Ιδιότητα Vlastnost Właściwość Lastnina Proprietate Tulajdonság Vlastnosť	Performance level Leistungsstufe Niveau de performance Prestatieniveau Livello di prestazione Nivel de prestaciones Nivel de desempenho Prestanda Ominaisuustaso Ydeevne niveau Ytelsesniv Επίπεδο απόδοσης Výkonnostní stupeň Poziom odporności Stopnja zmogljivosti Nivel de performanță Teljesítményszint Úroveň spôsobilosti
ISO 16603 (2004)	Resistance to penetration by blood and body fluids Widerstand gegen das Eindringen von Blut und Körperflüssigkeiten der Résistance à la pénétration par le sang et les fluides corporels Weerstand tegen penetratie van bloed en lichaamsvloeistoffen Resistenza alla penetrazione di sangue e liquidi corporei Resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales Resistência à penetração de sangue e fluídos corporais Resistens mot penetrering av blod och kroppsvätskor Veren ja ruumiinnesteiden läpäisevyys Modstand mod gennemtrængning af blod og kropsvæsker Motstand mot gjennomtrengning av blod og kroppsvæsker Αντοχή στη διείσδυση αίματος και σωματικών υγρών Odolnost proti průsaku krve a tělních tekutin Odpornosć na przenikanie krwi I płynów ustrojowych Odpornost proti prodiranju krvi in telesnih tekočin Rezistență la pătrunderea sângelui și a lichidelor corporale Vér és testfolyadékok behatolásával szembeni ellenállás Odolnosť voči prieniku krvi a telesných tekutín	Level 4 Klasse 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Clase 4 Classe 4 Nivå 4 Luokka 4 Class 4 Klasse 4 **Επίπεδο 4** Třída 4 Klasa 4 Stopnja 4 Clasă 4 4. osztály Úroveň 4
ISO 16604 (2004)	Resistance to penetration by blood borne pathogens – Test method using Phi-X174 bacteriophage Widerstand gegen das Eindringen von Blut übertragene Krankheitserreger - Prüfverfahren unter Verwendung von Phi-X174 Bakteriophage Résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang - Méthode d'essai utilisant le bactériophage Phi-X174 Weerstand tegen zich in het bloed bevindende pathogenen– Testmethode met Phi-X174 bacteriophage Resistenza alla penetrazione di agenti patogeni presenti nel sangue.Test eseguito con metodo PHI-X174 Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por sangre usando el bacteriófago Phi-X174 Resistência à penetração de microorganismos patogénicos por sangue usando o bacteriógrafo pelo método Phi-X174 Resistens mot penetrering av blodburna patogener – Testmetod med Phi-X174-bakteriofag Veriteitse leviävien taudinaiheuttajien läpäisevyys – testimenetelmässä käytetty Phi-X174-bakteriofagia Modstand mod gennemtrængning af blodbårne patogener - Testmetode ved hjælp af Phi-X174 bakteriofag Motstand mot gjennomtrengning av blodbårne patogener – testmetode ved bruk av Phi-X174-bakteriofag Αντοχή στη διείσδυση παθογόνων που μεταδίδονται με το αίμα – Μέθοδος δοκιμής με βακτηριοφάγο Phi-X174 Odolnost proti průsaku patogenů přenášených krví – zkušební metoda použitím bakteriofágu Phi-X174 Odpornosć na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew - Metoda badania z zastosowaniem bakteriofaga Phi-x174 Odpornost proti prodiranju patogenov, ki se prenašajo s krvjo – preizkusna metoda z uporabo bakteriofaga Phi-X174 Rezistență la pătrunderea agenților patogeni din sânge – Metoda de testare utilizând virusul bacteriofag Phi-X174 Vér útján terjedő kórokozók behatolásával szembeni ellenállás – A vizsgálat Phi-X174 bakteriofág használatával történt Odolnosť voči penetrácii krvou prenosných patogénov - testovacia metóda s použitím bakteriofágu Phi-X174	Level 4 Klasse 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Clase 4 Classe 4 Classe 4 Nivå 4 Class 4 Luokka 4 **Επίπεδο 4** Klasse 4 4. osztály Clasa 4 Klasa 4 Třída 4 Stopnja 4 Úroveň 4
ISO 22610 (2006)	Resistance to wet microbial penetration Widerstand gegen das Durchdringen von Bakterien (feucht) Résistance à la pénétration microbienne – Condition humide Weerstand tegen microbiële penetratie nat Resistenza alla penetrazione microbica da bagnato Resistencia a la penetración bacteriana húmeda Resistência penetração bacteriana em húmido Resistens mot våt mikrobiell penetrering Märkien mikrobien läpäisevyys Modstandsdygtighed over for våd mikrobiel indtrængen Motstand mot våt bakteriepenetrasjon Αντοχή στην υγρή μικροβιακή διείσδυση Odolnost proti mikrobiální penetraci za vlhka Odpornosć na przenikanie drobnoustrojów - na mokro Odpornost na mokro penetracijo mikrobov Rezistență la pătrunderea mediilor microbiene umede Mikrobák nedves körülmények között történő behatolásával szembeni ellenállás Odolnosť voči prieniku mikroorganizmov za mokra	Level 6 Klasse 6 Classe 6 Classe 6 Classe 6 Clase 6 Classe 6 Nivå 6 Luokka 6 Class 6 Klasse 6 **Επίπεδο 6** Třída 6 Klasa 6 Stopnja 6 Clasa 6 6. osztály Úroveň 6
ISO/DIS 22611 (2003)	Resistance to liquid aerosol penetration Widerstand gegen das Durchdringen von fl üssigen Aerosol Résistance à la pénétration des aérosols liquides Weerstand tegen vloeibare aërosol penetration Resistenza alla penetrazione da vapori Resistencia a la penetración de aerosol líquido Resistência penetração por aerosol húmido Resistens mot genomträngning av flytande aerosol Nestemäisen aerosolin läpäisevyys Modstandsdygtighed over for væskeformig aerosol penetration Motstand mot kontaminerte væsker i aerosolform Αντοχή στη διείσδυση υγρών αερολυμάτων Odolnost proti průsaku kapalných aerosolů Odpornosć na przenikanie ciekłego aerozolu Odpornost na prodiranje tekočega aerosola Rezistență la pătrunderea aerosolilor lichizi Folyékony aeroszol behatolásával szembeni ellenállás Odolnosť proti prieniku kvapalného aerosólu	Level 3 Klasse 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Clase 3 Classe 3 Nivå 3 Luokka 3 Class 3 Klasse 3 **Επίπεδο 3** Třída 3 Klasa 3 Stopnja 3 Clasa 3 3. osztály Úroveň 3
ISO 22612 (2005)	Resistance to dry microbial penetration Widerstand gegen das Durchdringen von Bakterien (trocken) Résistance à la pénétration microbienne – Condition sèche Weerstand tegen microbiële penetratie droog Resistenza della penetrazione microbica a secco Resistencia a la penetración microbiana seca Resistência penetração microbiana em seco Resistens mot torr mikrobiell genomträngning Kuivien mikrobien läpäisevyys Modstandsdygtighed over for tør mikrobiel indtrængen Motstand mot tørr bakteriepenetrasjon Αντοχή σε ξηρή μικροβιακή διείσδυση Odolnost proti mikrobiální penetraci za sucha Odpornosć na przenikanie drobnoustrojów - na sucho Odpornost na suho penetracijo mikrobov Rezistență la pătrunderea mediilor microbiene uscate Mikrobák száraz körülmények között történő behatolásával szembeni ellenállás Odolnosť voči prieniku mikroorganizmov za sucha	Level 3 Klasse 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Clase 3 Classe 3 Nivå 3 Luokka 3 Class 3 Klasse 3 **Επίπεδο 3** Třída 3 Klasa 3 Stopnja 3 Clasa 3 3. osztály Úroveň 3

ISO 6529 (2013):
Resistance to permeation of chemicals
Widerstand gegen das Eindringen von Chemikalien
Résistance à la pénétration des agents chimiques
Weerstand tegen doorlaatbaarheid van chemische stoffen
Resistenza alla permeazione di sostanze chimiche
Resistencia a la permeación a químicos
Resistência à penetração de quimícos
Motstånd mot genomsläpplighet av kemikalier
kemikaaliläpäisevyys
Modstand mod gennemtrængning af kemikalier
Motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier
Αντοχή στη διαπερατότητα των χημικών ουσιών
Odolnost proti permeaci chemikálií
Odpornosć na przenikanie substancji chemicznych
Odpornost na prepustnost kemikalij
Rezistența la pătrunderea substanțelor chimice
Vegyszerek áthatolásával szembeni ellenállás
Odolnosť voči prenikaniu chemikálií

Chemical Chemikalie Agent chimique Chemische stof Agente chimico Químico Químico Kemikalie Kemikaali Kemikalie Kjemikalie Χημικό Chemikálie Substancja chemiczna Kemikalije Substanță chimică Vegyszer Chemikália	**Material Material Résultats Materiaal Materiale Material Material Material Materiaali Materiale Materiale Υλικό Materiál Materiał Material Material Anyag Materiál**
Sulphuric Acid 96% Schwefelsäure 96% Acide Sulfurique 96% Zwavelzuur 96% Acido Solforico 96% Ácido sulfúrico 96% Ácido Sulfúrico 96% Svavelsyra 96 % Rikkihappo 96 % Svovlsyre 96% Svovelsyre 96 % Θειικό οξύ 96% Kyselina sírová 96 % Kwas Siarkowy 96% Žveplova kislina 96 % Acid sulfuric 96% Kénsav, 96%-os Kyselina sírová, 96%	Level 5 Klasse 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Clase 5 Classe 5 Nivå 5 Luokka 5 Class 5 Klasse 5 **Επίπεδο 5** Třída 5 Klasa 5 Stopnja 5 Clasa 5 5. osztály Úroveň 5
Sodium hydroxide 40% Natriumhydroxid 40 % Hydroxyde de Sodium 40% Natriumhydroxide 40% Idrossido di sodio 40% Hidróxido sódico 40 % Hidróxido de sódio a 40% Natriumhydroxid 40 % Natriumhydroksidi 40 % Natriumhydroxid 40 % Natriumhydroksid 40 % Υδροξείδιο του νατρίου 40% Hydroxid sodný 40% Wodorotlenek sodu 40% Natrijev hidroksid 40 % Hidroxid de sodiu 40 % Nátrium-hidroxid 40% Hydroxid sodný 40 %	Level 5 Klasse 5 Classe 5 Classe 5 Classe 5 Clase 5 Classe 5 Nivå 5 Luokka 5 Class 5 Klasse 5 **Επίπεδο 5** Třída 5 Klasa 5 Stopnja 5 Clasa 5 5. osztály Úroveň 5