
REF ORVN12
REF ORVN15

en INSTRUCTIONS FOR USE
de GEBRAUCHSANWEISUNG
fr NOTICE D'UTILISATION
nl GEBRUIKSAANWIJZING
it ISTRUZIONI PER L'USO
es INSTRUCCIONES DE USO
pt INSTRUÇÕES PARA USO

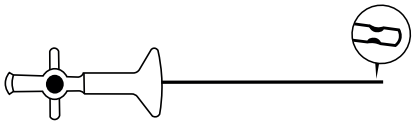

STERILE EO

1639

Latex Free - Latexfrei - Sans latex -
Latexvrij - Senza lattice -
Sin Látex - Sem látex

Medical Device - Medizinprodukt - Dispositif médical -
Medisch hulpmiddel - Dispositivo Medico -
Producto Sanitario - Dispositivo médico

Wickimed (Huizhou) Medical Equipment Manufacturing Co.,
Ltd Tang Jiao Xing Wang Street, Lilin Town,
Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong,
516035, P.R CHINA.

EC REP Shanghai International Holding Corp.
GmbH (Europe) Eiffestrasse 80,
20537 Hambourg, Germany

Distributed in Europe by: Medline International France SAS,
5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

RG20WIC 2020-07

en VERESS NEEDLE
DISPOSABLE INSUFFLATION NEEDLE

Indication for use:
Veress Needles are intended to establish pneumoperitoneum prior to laparoscopy procedures.

Description:
Medline Veress Needles is a stainless steel needle with 14G outside diameter.
Veress Needles have a spring-loaded blunt stylet mechanism and comprise an ergonomic handle with a stopcock and a luer lock connector for insufflation tubing.

The inner stylet cannula retracts as the needle is pushed through the peritoneum and extends once the abdominal cavity has been reached.

Sterilised by ethylene oxide (EO).

Medline Veress Needle is available in two different lengths: 120 mm (ORVN12) and 150 mm (ORVN15).

Instructions for use:
1. Inspect packaging to ensure it is not broken or damaged.
2. Open packaging using aseptic technique, remove needle protection, and inspect overall condition and physical integrity.
3. Close and open the stopcock to ensure it works properly. Ensure it remains closed for insertion.
4. Make a small incision to insert the needle and inspect the handle to ensure that the safety red indicator slides back towards the stopcock. This indicates the inner stylet is retracting.
5. Once inserted, verify that the safety red indicator is back to its initial position (fully away from the stopcock), meaning the inner stylet is in full distal position; ready for insufflation.
6. Connect Veress Needle to the insufflation tubing for establishing pneumoperitoneum.

Contraindications:
Do **NOT** use if the endoscopic techniques are contraindicated.

Important:
- Single Use Only.
- Contents are sterile unless packaging was opened or is damaged.
- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to Medline and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
- **Do NOT reuse and/or re-sterilise. Reuse of single-use devices creates a potential risk for the patient or user. It may cause contamination and/or impairment of function, which may lead to injury, illness and/or death of the patient.**

Precautions:
Do **NOT** attempt to insert the Veress Needle if the safety red indicator does not slide back.
Do **NOT** use the device if sterile conditions have been compromised or the packaging is damaged.
The product must be used exclusively by qualified medical staff. Thorough understanding of principles, instrumentation and techniques involving minimal invasive procedures is required to avoid possible injuries to both patient and medical staff.

Disposal instructions:
Discard after use. Precautions should be taken when discarding this device. Disposal of the device should be done in accordance with applicable hospital or national regulations for biologically hazardous waste.

Storage:
Store under light-proof and clean conditions. Avoid exposure to sunlight and relative humidity levels over 80%.

de VERESSNADEL
INSUFFLATIONSNADEL ZUR PNEUMOPERITONEUM ETABLIERUNG

Gebrauchsanweisung:
Die Veres-Nadeln werden verwendet zum Anlegen eines Pneumoperitoneums vor laparoskopischen Eingriffen.

Beschreibung
Die Veres-Nadel von Medline ist eine Edelstahlkanüle mit einem 14G Außendurchmesser.
Die Veres-Nadeln sind mit einem stumpfen Mandrin Federmechanismus versehen und haben einen ergonomischen Handgriff mit einem Zwei-Wege-Hahn und Luer-Lock-Anschluss für den Insufflationsschlauch.

Der innere Mandrin wird beim Durchstechen des Gewebes gegen einen Federmechanismus zurückgeschoben, so dass die Nadel das Gewebe trennen kann. Nach dem Durchstoß und Erreichen der Bauchhöhle rutscht der Mandrin in der Nadel wieder nach vorn.

Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.

Die Medline Veres-Nadeln sind in zwei verschiedenen Längen verfügbar: 120 mm (ORVN12) und 150 mm (ORVN15).

Gebrauchsanweisung:
1. Überprüfen Sie die Verpackung um sicherzustellen, dass sie nicht aufgebrochen oder beschädigt ist.
2. Öffnen Sie die Verpackung unter Anwendung aseptischer Techniken, entfernen Sie die Schutzhülle der Kanüle und überprüfen Sie sie auf Gesamtzustand und Unversehrtheit.
3. Öffnen und schließen Sie den Insufflationshahn, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert. Stellen Sie sicher, dass er beim Einführen der Nadel geschlossen bleibt.
4. Machen Sie einen kleinen Schnitt, um die Nadel einzuführen. Überprüfen Sie beim Einführen der Nadel den Handgriff, um sich zu versichern, dass sich der rote Sicherheitsring Richtung Insufflationshahn zurückschiebt. Dies bedeutet, dass der stumpfe Mandrin zurückgedrückt wird.
5. Wenn die Nadel eingeführt ist, überprüfen Sie, dass sich der rote Sicherheitsring wieder in seiner ursprünglichen Position befindet (vom Insufflationshahn entfernt) und somit der Mandrin distal positioniert und für die Insufflation bereit ist.
6. Schließen Sie den Insufflationsschlauch an den Luer-Lock-Anschluss der Veres-Nadel an, um die Peritoenalhöhle mit Gas zu befüllen.

Kontraindikationen:
NICHT verwenden, wenn Kontraindikationen für einen endoskopischen Eingriff vorliegen.

Wichtig:
- Einmalgebrauch.
- Der Inhalt ist steril, es sei denn, die Verpackung wurde geöffnet oder ist beschädigt.
- Alle Vorfälle (Incidents) im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt sollten Medline und der zuständigen Behörde desjenigen Mitgliedsstaates gemeldet werden, in dem sich der Anwender bzw. Patient befindet.
- **NICHT wiederverwenden und/oder erneut sterilisieren. Die Wiederverwendung von Einweg-Medizinprodukten bringt ein potenzielles Risiko für den Patienten oder den Nutzer mit sich. Es kann zu einer Kontamination oder Beeinträchtigung der Funktion kommen, die zur Verletzung, Erkrankung und/oder zum Tod des Patienten führen kann.**

Vorsichtsmaßnahmen:
Versuchen Sie **NICHT**, die Veres-Nadel einzuführen, wenn der rote Sicherheitsring nicht zurückschnappt.
Verwenden Sie das Produkt **NICHT**, wenn die sterilen Bedingungen gefährdet wurden oder die Verpackung beschädigt ist.
Das Produkt ist ausschließlich für die Anwendung durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal bestimmt. Umfassende Kenntnisse der Grundlagen, des Instrumentariums und der Techniken minimal-invasiver Chirurgie sind erforderlich, um eventuelle Verletzungen von Patienten und medizinischen Fachpersonal zu verhindern.

Entsorgungshinweise
Nach Gebrauch entsorgen. Bei der Entsorgung des Produktes sollten Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden Das Produkt sollte gemäß der geltenden Vorschriften der medizinischen Einrichtung oder den nationalen Bestimmungen für biologische Gefahrenstoffe entsorgt werden.

Lagerbedingungen:
Lichtgeschützt und sauber lagern. Nicht der Sonneneinstrahlung aussetzen und eine relative Luftfeuchtigkeit von über 80 % vermeiden.

fr AIGUILLE DE VERESS
AIGUILLE INSUFFLATION STERILE

Indication d'utilisation:
Les aiguilles de Veress sont destinées à établir un pneumopéritoine avant les procédures de laparoscopie.

Description :
Medline Veress Needles est une aiguille en acier inoxydable avec un diamètre extérieur de 14G.
Les aiguilles de Veress ont un mécanisme de stylet émoussé à ressort et comprennent une poignée ergonomique avec un robinet d'arrêt et un connecteur luer lock pour les tubes d'insufflation.

La canule interne du stylet se rétracte lorsque l'aiguille est poussée à travers le péritoine et s'étend une fois la cavité abdominale atteinte.

Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).

L'aiguille de Veress Medline est disponible en deux longueurs différentes: 120 mm (ORVN12) et 150 mm (ORVN15).

Mode d'emploi:
1. Inspectez l'emballage pour vous assurer qu'il n'est pas cassé ou endommagé.
2. Ouvrez l'emballage en utilisant une technique aseptique, retirez la protection de l'aiguille et inspectez l'état général du produit
3. Fermez et ouvrez le robinet d'arrêt pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Assurez-vous qu'il reste fermé pour l'insertion.
4. Faire une petite incision pour insérer l'aiguille et inspecter la poignée pour s'assurer que l'indicateur de sécurité rouge glisse vers le robinet d'arrêt. Cela indique que le stylet intérieur se rétracte.
5. Une fois inséré, vérifiez que l'indicateur de sécurité rouge est de retour à sa position initiale (complètement éloigné du robinet), ce qui signifie que le stylet intérieur est en position distale complète; prêt pour l'insufflation.
6. Connecter l'aiguille de Veress au tube d'insufflation pour établir le pneumopéritoine.

Contre-indications:
NE PAS utiliser si les techniques endoscopiques sont contre-indiquées.

Important :
- A usage unique.
- Le contenu est stérile sauf si l'emballage a été ouvert ou est endommagé.
- Si un accident grave se produit impliquant le dispositif, ceci doit être rapporté à Medline et aux autorités compétentes de l'État, dans lequel le dispositif est utilisé et/ou le patient est hospitalisé
- **NE PAS réutiliser et / ou re-stériliser. La réutilisation de dispositifs à usage unique présente un risque pour le patient et pour l'utilisateur. Cela peut être la cause de contamination et/ou une altération des fonctions du dispositif, et provoquer des blessures, maladies et/ou la mort du patient.**

Précautions:
N'essayez **PAS** d'insérer l'aiguille de Veress si l'indicateur de sécurité rouge ne glisse pas vers l'arrière.
N'utilisez **PAS** l'appareil si les conditions stériles ont été compromises ou si l'emballage est endommagé.
Le produit doit être utilisé exclusivement par le personnel médical qualifié. Une connaissance approfondie des principes, de l'instrumentation et des techniques impliquant des procédures invasives minimales est requise pour éviter d'éventuelles blessures au patient et au personnel médical.

Instructions d'élimination
Jeter après utilisation. Des précautions doivent être prises lors de l'élimination de cet appareil. conformément au processus de l'établissement et à la réglementation sur les déchets dangereux.

Stockage
Conserver dans des conditions de lumière et propres. Évitez l'exposition au soleil et à des niveaux d'humidité relative supérieurs à 80%.

nl

VERESS NAALD
INSUFFLATIE NAALD VOOR ÉÉNMALIG GEBRUIK

Gebruiksindicatie:
Veress-naalden zijn bedoeld om pneumoperitoneum te creëren voorafgaand aan de laparoscopieprocedures.

Omschrijving:
Medline Veress-naalden zijn roestvrijstalen naalden met een buitendiameter van 14G.
Veress-naalden hebben een veer-belast stomp stylet mechanisme en bestaat uit een ergonomische handgreep met een stopkraan en een luer-lock aansluiting voor de insufflatieslang.

De binnenste stilet van de canule trekt zich terug als de naald door het buikvlies wordt geduwd en steekt uit als de buikholte is bereikt.

Gesteriliseerd met ethyleenoxide (EO).

Medline Veress-naalden zijn verkrijgbaar in twee verschillende lengtes: 120 mm (ORVN12) en 150 mm (ORVN15).

Gebruiksaanwijzing:
1. Controleer de verpakking om er zeker van te zijn dat deze niet gebroken of beschadigd is.
2. Open de verpakking met behulp van een aseptische techniek, verwijder de naaldbescherming en controleer de algemene staat en fysieke integriteit.
3. Sluit en open de afsluitkraan om er zeker van te zijn dat deze goed werkt. Zorg ervoor dat hij gesloten blijft voor het inbrengen.
4. Maak een kleine incisie om de naald in te brengen en inspecteer het handvat om er zeker van te zijn dat de rode veiligheidsindicator terug glijdt naar de afsluitkraan. Dit geeft aan dat de binnenste stilet zich terugtrekt.
5. Controleer na het inbrengen of de rode veiligheidsindicator weer in zijn oorspronkelijke positie staat (volledig weg van de afsluitkraan), wat betekent dat de binnenste stilet zich in de volledige distale positie bevindt; klaar voor insufflatie.
6. Sluit de Veress-naald aan op de insufflatieslang voor het creëren van een pneumoperitoneum.

Contra-indicaties:
NIET gebruiken als endoscopische technieken zijn gecontra-indiceerd.

Belangrijk:
- Eenmalig gebruik.
- De inhoud is steriel, tenzij de verpakking is geopend of beschadigd.
- Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden in verband met het hulpmiddel, dient te worden gemeld aan Medline en de bevoegde autoriteit van de Lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
- **Niet hergebruiken en/of hersteriliseren. Hergebruik van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik vormt een potentieel risico voor de patiënt of gebruiker. Mogelijke gevolgen zijn besmetting en functieverlies, wat kan leiden tot letsel, ziekte en/of overlijden van de patiënt.**

Voorzorgsmaatregelen:
Probeer de Veress-naald **NIET** in te brengen als de rode veiligheidsindicator niet naar achteren schuift.
Gebruik het instrument **NIET** als de steriele omstandigheden zijn aangetast of de verpakking is beschadigd.
Het product mag uitsluitend worden gebruikt door gekwalificeerd medisch personeel. Een grondige kennis van de principes, de instrumentatie en de technieken die gepaard gaan met minimale invasieve procedures is vereist om mogelijk letsel bij zowel de patiënt als het medisch personeel te voorkomen.

Instructies voor verwijdering:
Verwijderen na gebruik. Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het verwijderen van dit instrument. Het instrument moet worden weggegooid in overeenstemming met de geldende ziekenhuis- of nationale voorschriften voor biologisch gevaarlijk afval.

Opslag:
Bewaren onder lichtdichte en schone omstandigheden. Blootstelling aan zonlicht en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 80% vermijden.

it

AGO DI VERESS
AGO PER INSUFFLAZIONE

Istruzioni per l'uso
Gli aghi Veress hanno lo scopo di stabilire il pneumoperitoneo prima delle procedure di laparoscopia.

Descrizione
L' ago di Veress di Medline è un ago in acciaio inossidabile con diametro esterno 14G.
Gli aghi Veress hanno un meccanismo a stiletto smussato caricato a molla e comprendono una maniglia ergonomica con un rubinetto di arresto e un connettore luer lock per tubi di insufflazione.

La cannula a stiletto interna si ritrae mentre l'ago viene spinto attraverso il peritoneo e si estende una volta raggiunta la cavità addominale.

Sterilizzato con ossido di etilene (EO).

L'Ago di Veress di Medline è disponibile in due diverse lunghezze: 120 mm (ORVN12) e 150 mm (ORVN15).

Istruzioni per l'uso
1. Ispezionare l'imballaggio per assicurarsi che non sia rotto o danneggiato.
2. Aprire l'imballaggio con tecnica asettica, rimuovere la protezione dell'ago e ispezionare le condizioni generali e l'integrità fisica.
3. Chiudere e aprire il rubinetto per assicurarsi che funzioni correttamente. Assicurarsi che rimanga chiuso per l'inserimento.
4. Praticare una piccola incisione per inserire l'ago e ispezionare l' impugnatura per assicurarsi che l'indicatore rosso di sicurezza scivoli indietro verso il rubinetto. Questo indica che lo stiletto interno sta retrocedendo.
5. Una volta inserito, verificare che l'indicatore rosso di sicurezza sia tornato nella sua posizione iniziale (completamente lontano dal rubinetto), il che significa che lo stiletto interno è in posizione completamente distale; pronto per l'insufflazione.
6. Collegare l'ago Veress al tubo di insufflazione per stabilire il pneumoperitoneo.

Controindicazioni:
NON utilizzare se le tecniche endoscopiche sono controindicate.

Importante:
- Monouso.
- Il contenuto è sterile a meno che la confezione non sia stata aperta o danneggiata.
- Nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente grave in relazione al dispositivo, tale istanza andrà riportata a Medline ed all'autorità competente dello Stato Membro ove risiedono l'utente e/o il paziente.
- **NON riutilizzare e / o risterilizzare. Il riutilizzo di dispositivi monouso costituisce un potenziale rischio per il paziente o utilizzatori. Potrebbe, infatti, dar luogo a contaminazioni e/o problematiche i quali, a loro volta, potrebbero causare lesioni, patologie e/o la morte del paziente.**

Precauzioni
NON tentare di inserire l'ago Veress se l'indicatore rosso di sicurezza non scorre indietro.
NON utilizzare il dispositivo se le condizioni di sterilità sono state compromesse o la confezione è danneggiata.
Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale medico qualificato. È necessaria una conoscenza approfondita dei principi, della strumentazione e delle tecniche che implicano procedure mininvasive per evitare possibili lesioni al personale medico e al paziente.

Istruzioni per lo smaltimento:
Smaltire dopo l'utilizzo È necessario prendere precauzioni quando si elimina questo dispositivo. Smaltire il dispositivo in conformità con le normative ospedaliere o nazionali applicabili per rifiuti biologicamente pericolosi.

Immagazzinamento
Conservare in luogo pulito e lontano da sorgenti di luce diretta. Evitare l'esposizione alla luce solare e livelli di umidità relativa superiori all'80%.

es

AGUJA DE VERESS
AGUJA PARA INSUFLACIÓN DESECHABLE

Indicaciones de uso:
Las agujas de Veress están destinadas a establecer el neumoperitoneo antes de los procedimientos de laparoscopia.

Descripción:
Las agujas de Veress de Medline son de acero inoxidable y tienen un diámetro exterior de 14G.
Las agujas Veress estan provistas de un mecanismo de embolo de punta roma, apoyado sobre une resorte, un mango ergonómico con llave de paso, y un conector Luer Lock para tubos de insuflación.

La cánula interna, émbolo de punta roma, se retrae cuando la aguja se introduce a través del peritoneo y se extiende una vez que se alcanza la cavidad abdominal.

Esterilizada por óxido de etileno (EO).

La aguja de Veress de Medline está disponible en dos tamaños: 120 mm (ORVN12) y 150 mm (ORVN15).

Instrucciones de uso:
1. Inspeccione el embalaje para asegurarse de que no esté roto o dañado.
2. Abra el embalaje utilizando una técnica aséptica, retire la protección de la aguja e inspeccione el estado general y la integridad del dispositivo.
3. Cierre y abra la llave de paso para asegurarse de que funciona correctamente. Asegúrese de que la llave de paso permanece cerrada para la inserción.
4. Haga una pequeña incisión para insertar la aguja e inspeccione el mango para asegurarse de que el indicador rojo de seguridad se desliza hacia la llave de paso. Esto indica que la cánula interna se está retrayendo.
5. Una vez insertada, verifique que el indicador rojo de seguridad haya vuelto a su posición inicial (completamente alejado de la llave de paso), lo que significa que la cánula interna está extendida; lista para la insuflación.
6. Conecte la aguja de Veress al tubo de insuflación para establecer el neumoperitoneo.

Contraindicaciones:
NO utilize la aguja de Veress si las técnicas endoscópicas están contraindicadas.

Importante:
- De un solo uso.
- El contenido es estéril a menos que el embalaje se haya abierto o esté dañado.
- Si se ha producido un incidente grave en relación con el dispositivo, deberá notificarse a Medline y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.
- **NO reutilice ni reesterilice. La reutilización de dispositivos de un solo uso supone un riesgo potencial para el paciente y el usuario. Puede causar contaminación o deterioro de su función, lo que puede causar lesiones, enfermedades o la muerte de un paciente.**

Precauciones:
NO intente insertar la aguja de Veress si el indicador rojo de seguridad no se desliza hacia atrás.
NO use el dispositivo si las condiciones de esterilidad se han visto comprometidas o si el embalaje está dañado.
El producto debe ser utilizado exclusivamente por personal médico cualificado. Se requiere una comprensión profunda de los principios, instrumentación y técnicas que implican los procedimientos mínimamente invasivos para evitar posibles lesiones tanto al paciente como al personal médico.

Instrucciones de eliminación:
Desechar después de usar. Se deben tomar precauciones al desechar este dispositivo. Deben tomarse precauciones al desechar este dispositivo, y su eliminación se realizará de conformidad con la legislación nacional o los reglamentos del hospital aplicables para residuos biológicamente peligrosos.

Almacenamiento;
Almacene fuera del alcance de fuentes de luz y en condiciones de limpieza. Evite la exposición a la luz solar y niveles de humedad relativa superiores al 80%.

pt

AGULHA DE VERESS
AGULHA DE INSUFLAÇÃO DESCARTAVEL

Indicação de utilização:
As Agulhas de Veress destinam-se a estabelecer o pneumoperitónio antes dos procedimentos de laparoscopia.

Descrição:
As Agulhas de Veress da Medline são agulhas de aço inox com um diâmetro externo de 14G.
As Agulhas de Veress possuem um mecanismo de estilete sem corte com mola e têm um punho ergonómico com torneira e um conector luer lock para tubos de insuflação.

A cânula do estilete interno retrai-se quando a agulha é empurrada através do peritónio e estende-se assim que se atingir a cavidade abdominal.

Esterilizado por óxido de etileno (EO).

A Agulha de Veress da Medline está disponível em dois comprimentos diferentes: 120 mm (ORVN12) e 150 mm (ORVN15).

Instruções de utilização:
1. Inspecione a embalagem para garantir que esta não se encontra partida nem danificada.
2. Abra a embalagem com uma técnica assética, tire a proteção da agulha e inspecione o estado geral e a integridade física.
3. Feche e abra a torneira para garantir que funciona corretamente. Certifique-se de que a mesma permanece fechada durante a introdução.
4. Faça uma pequena incisão para introduzir a agulha e inspecione o punho para garantir que o indicador vermelho de segurança desliza para trás em direção à torneira. Isto indica que o estilete interno está a retrair-se.
5. Depois de introduzida, verifique se o indicador vermelho de segurança regressou à posição inicial (completamente afastado da torneira), o que significa que o estilete interno se encontra em posição distal completa; pronto para insuflar.
6. Ligue a Agulha de Veress à tubagem de insuflação para estabelecer o pneumoperitónio.

Contraindicações:
NÃO usar em caso de contraindicação de técnicas endoscópicas.

Importante:
- De utilização única.
- Os conteúdos encontram-se estéreis, a não ser que a embalagem tenha sido aberta ou se encontre danificada.
- Se tiver ocorrido um incidente grave relacionado com o dispositivo, o incidente deve ser comunicado à Medline e à autoridade competente do Estado-membro no qual residem o utilizador e/ou o doente.
- **NÃO reutilizar nem re-esterilizar. A reutilização de dispositivos de utilização única coloca um risco potencial de infeções no doente ou utilizador. Poderá provocar contaminação e/ou deterioração da função o que poderá causar lesões, doenças e/ou a morte de um doente.**

Precauções:
NÃO tente introduzir a Agulha de Veress se o indicador vermelho de segurança não deslizar para trás.
NÃO use o dispositivo se as condições estéreis tiverem sido comprometidas ou se a embalagem estiver danificada.
O produto só pode ser usado exclusivamente por pessoal médico qualificado. É necessária uma compreensão exaustiva dos princípios, instrumentação e técnicas subjacentes aos procedimentos minimamente invasivos para evitar possíveis lesões no doente e na equipa médica.

Instruções relativas à eliminação:
Eliminar após a utilização. Deve tomar precauções ao eliminar este dispositivo. A eliminação do dispositivo deve ser feita de acordo com os regulamentos hospitalares ou nacionais aplicáveis relativos aos resíduos biologicamente perigosos.

Armazenamento:
Armazenar em condições limpas e abrigado da luz. Evitar a exposição solar e níveis de humidade relativa superiores a 80%.