
Medline International Iberia SLU
Parque Empresarial San Fernando,
Edificio Múnich, Planta Baja, Avda. de Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares, Madrid

www.medline.eu/es/

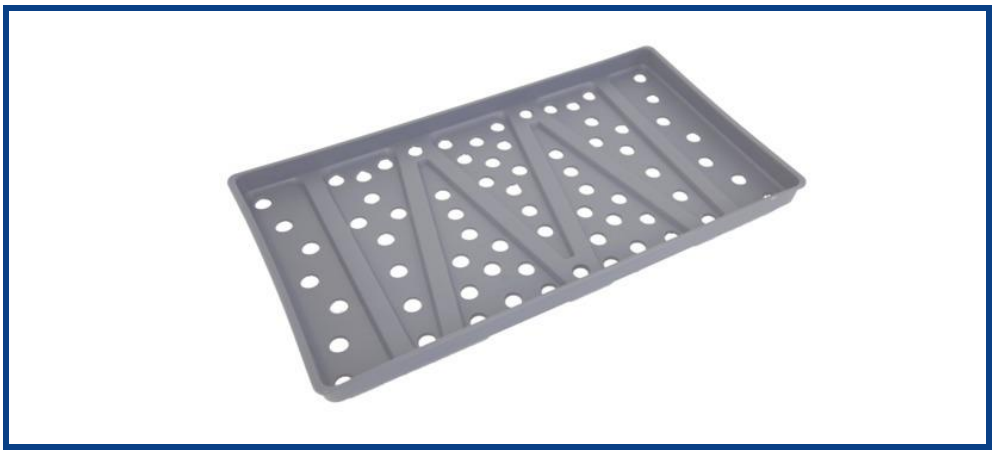

Ficha técnica

Bandeja de transporte para esterilización

Referencia(s)

GEMTRAY3CE, GEMTRAY4CE

Descripción

Código	Descripción
GEMTRAY3CE	Bandeja de transporte para esterilización de 30 x 56 cm
GEMTRAY4CE	Bandeja de transporte para esterilización de 43 x 68,6 cm

Materiales principales

Fabricada con plástico rígido de polipropileno 100% con perforaciones y parte inferior acanalada para permitir el flujo de aire.

Cantidad por caja

GEMTRAY3CE	10 unidades por caja
GEMTRAY4CE	8 unidades por caja

Envasado

Todas las unidades en una caja de cartón

Fabricante

Medline Industries Inc., Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA
EN ISO 13485

Normativa

De conformidad con la normativa sobre productos sanitarios (UE) 2017/745
Clase: I no estéril

- Por favor, consulte el etiquetado completo y las instrucciones de uso antes de usar el producto.

Instrucciones de uso

GEMTRAY es una bandeja de transporte que se utiliza para el transporte de paquetes de instrumental envueltos Envolver la caja de instrumental de acuerdo con su procedimiento habitual.
Colocar la caja envuelta en la bandeja de transporte hasta que esté lista para ser abierta en el quirófano.
Usar la bandeja de transporte para levantar y dar soporte a la caja del instrumental, mover la unidad entera al esterilizador siguiendo el procedimiento hospitalario habitual.
Las bandejas de transporte se pueden usar en esterilizadores de autoclave de vapor.
Después del enfriado, mover la bandeja de transporte con la caja envuelta a la zona de almacenamiento estéril hasta que se vuelva a usar en el quirófano.
Las bandejas deben ser inspeccionadas para comprobar si están dañadas o agrietadas y, si es así, desecharlas.
Limpiar y desinfectar la bandeja de transporte de acuerdo con los protocolos generales del hospital y las normas de buenas prácticas
Desechar el producto de acuerdo con la política del hospital, la administración y/o el gobierno local.

Revisión: 3
Número de documento: EU1-00004-F- Título del documento: FINT.441 - Technical

© 2020 Medline Industries Inc. o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.