
Medline International Iberia S.L.U
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich, Planta Baja, local B
Avenida de Castilla 2
28830 San Fernando de Henares
Madrid
España
Tel: +34 900 600 602
email Pedidos:
es-pedidos@medline.com
email Atención al Cliente:
es-atencioncliente@medline.com
www.medline.eu/es



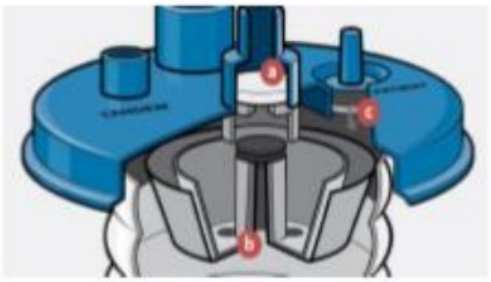

Ficha técnica

Sistema de succión MED-SOFT « Flujo alto »

Referencia(s)

OR1930

Descripción

MED-SOFT "Flujo alto" es una bolsa de aspiración cerrada para la recogida de fluidos corporales, líquidos y residuos de aspiración. La bolsa es de un solo uso (desechable):

La bolsa MED-SOFT está compuesta por :

- Una bolsa texturada y translúcida con fondo conformado para mantener la estructura para
  - una lectura de volúmenes más precisa
  - Permitir que la bolsa se mantenga recta y estable al manipularla.
- una tapa azul (sellada a la bolsa) con 4 puertos de diferentes diámetros y sus tapones correspondientes:

La bolsa tiene una capacidad de 3 litros de volumen.

1. PUERTO DE VACÍO: permite la conexión del tubo de vacío rojo desde el cánister reutilizable. Para proteger la fuente de vacío de la contaminación, cada bolsa MED-SOFT está construida con:

a. El filtro bacteriológico que protege la fuente de vacío de los líquidos en aerosol y las micropartículas generadas por la aspiración **(Eficiencia de filtrado bacteriano: 96,8%)**
b. La válvula de cierre mecánico: para evitar el desbordamiento de líquidos y espumas en la fuente de vacío cuando la bolsa MED-SOFT está llena. Este sistema de protección mecánica interrumpe la entrada de vacío y la aspiración si la bolsa se golpea o se aleja de repente de la posición vertical.

NOTA: Para continuar con la aspiración, desconecte el tubo de vacío del puerto de vacío y deje que la válvula de cierre mecánico vuelva a la posición abierta. A continuación, vuelva a conectar el tubo de vacío al puerto de vacío.

2. PUERTO DEL PACIENTE: Permite la conexión del tubo del paciente. El puerto del paciente está equipado con un conector de codo en L de 90°. Puede retirarse o utilizarse para facilitar la conexión y evitar que se retuerza el tubo del paciente.

c. La válvula antirreflujo en el puerto de paciente evita el reflujo de líquidos y aerosoles al desconectar el tubo del paciente.

3. PUERTO TÁNDEM: permite la conexión de tubos en tándem (ref.: DYNDTND) con otra bolsa de aspiración MEDSOFT para la recogida en serie de un mayor volumen de líquido durante cirugías específicas.

4. Puerto de accesorios: Es el puerto más grande de la tapa. Permite la conexión de accesorios como los dispositivos para recoger muestras (ref.: OR123 / OR124 / OR125 / OR169), o añadir dosis del solidificante MED-GEL (ref.: RE2015- agente gelificante) al final del procedimiento para una eliminación de los desechos segura.

Las características de seguridad del PUERTO DE VACÍO (válvula de cierre mecánica y filtro bacteriológico) y del PUERTO DEL PACIENTE (válvula antirreflujo) clasifican a MED-SOFT como un

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 6

	sistema de aspiración cerrado con una protección óptima para los pacientes y los profesionales sanitarios.
Materiales principales	Bolsa de aspiración: Bolsa transparente (polietileno transparente) Tapa azul y accesorios (polipropileno) Válvula de paciente antirreflujo/retorno (TPE - elastómero termoplástico)
Cantidad por caja/Envasado	Bolsa de aspiración: cada bolsa de aspiración está envasada individualmente en una película de polietileno sellada con muescas para facilitar su apertura. Las bolsas de aspiración se recogen en una gran bolsa de PE para optimizar el transporte y el almacenamiento 50 bolsas de aspiración por caja Volumen, número de lote y fecha de expiración impresos en la tapa azul.
Fabricante legal	Medline Industries LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 Estados Unidos – BS EN ISO 13485
Normativa	De acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 de productos sanitarios y del Reino Unido Cumple con la norma EN10079-3 «Equipo médico de succión - Parte 3: Dispositivos alimentados por una fuente de vacío o presión.» Clase: I no estéril • Consultar el etiquetado y las instrucciones de uso completas (si procede) antes de utilizar el producto.

© 2022 Medline Industries LP o una de sus filiales. Todos los derechos reservados.

TDS_OR1930_ES02

Periodo de retención: Fin de su vida útil y periodo de s

Número de documento: EU1-00004-F-00025 Título del documento: FINT.441 - Technical sheet Revisión: 6