40x20cm
两面印刷

折痕线


400mm

200mm

正面

FFP2 NR
PARTICULATE RESPIRATORS

- en Instructions for Use
- fr Mode d’emploi
- nl Gebruiksaanwijzingen
- de Gebrauchsanweisung
- it Istruzioni per l’uso
- es Instrucciones de uso
- pt Instruções de utilização

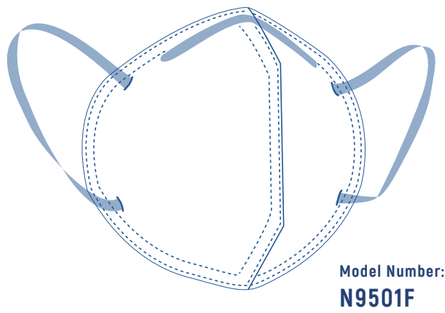

Model Number:
N9501F

Notified Body: BSI Group The Netherlands B.V
Address: Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands

Manufacturer:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
EU Declaration of Conformity Internet download address:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

European Respresentative:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany

ZD logo marking on the product indicates Zhende Medical Co., Ltd.
This IFU will be translanted in all languages of the intended countries for sales or copies of the translations.

Version: 03
Rev. Date: 2021.09.25

Instructions for Use

Product Name: FFP2 NR Particulate Respirators
FFP2 means the performance level of the mask, and NR means non-reusable

Model: N9501F

Intended Use:
Filtering half masks, as RPE, use filters to remove contaminants from the air being breathed in, and to protect against particles except for escape purposes.

Warning:
1. Select the respirator type and determine the suitability of the respirator according to the intended use.
2. The respirator shall be abandoned when it is broken, becomes difficult to breathe, or polluted by body fluids.
3. This respirator is disposable, do not reuse or use for more than one shift.
4. Check the respirator before use. Make sure there are no broken ear loops, no holes or other damages on the respirator. If any damage detected, please do not use and replace with a new one immediately.
5. The effectiveness will be reduced if facial hair or beard passes under the face seal.
6. The respirator should only be used in intended environment. Failure to follow the instruction may cause harm to health or reduce the effectiveness.
7. The respirator cannot provide intended protection if the mask is not correctly donned or is damaged.
8. Never alter or modify this respirator in any way.
9. This respirator does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life.
10. The respirator has a shelf-life of 3 years. After the expiry date the respirator must no longer be used.
11.Do not use in explosive atmospheres.

Storage:
1.The unused masks need to be stored in the environment that is well ventilated, dry and away from light. Keep away from fire, pollutants and potential source of pollution.
2. Storage temperature: -20℃ to 50 ℃ and less than 80% relative humidity.
3. Keep the masks in original packaging boxes during transportation to protect against mechanical damage and contamination.

Limitations of Use: Do not use the product in explosive atmospheres. Discard and replace respirator if it becomes damaged or breathing resistance becomes excessive.
The respirator complies with Regulation (EU) 2016/425, and conforms with EN 149:2001+ A1:2009.

Application Instruction:



Notified Body: BSI Group The Netherlands B.V
Address: Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands



Manufacturer:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
EU Declaration of Conformity Internet download address:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

European Respresentative:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany

ZD logo marking on the product indicates Zhende Medical Co., Ltd.
This IFU will be translanted in all languages of the intended countries for sales or copies of the translations.

Version: 03
Rev. Date: 2021.09.25

Mode d’emploi

Nom du produit: Masque respiratoire à filtration de particules FFP2 NR
FFP2 signifie le niveau de performance du masque, et NR signifie non réutilisable

Modèle: N9501F

Utilisation prévue:
Les demi-masques filtrants, comme RPE, utilisent des filtres pour éliminer les contaminants de l’air respirable, et protégent contre les particules.

Attention:
1. Sélectionner le type de masque respiratoire et déterminer s’il convient à l’utilisation prévue.
2. Le masque respiratoire doit être jeté lorsqu’il est cassé, lorsqu’il est difficile de respirer ou lorsqu’il a été contaminé par des fluides corporels.
3. Ce masque respiratoire est jetable, ne pas le réutiliser ou le porter plus d’une journée.
4. Vérifier l’état du masque avant utilisation. S’assurer que les élastiques d’oreille ne sont pas cassés et que le masque n’est ni troué ni endommagé. S’il est endommagé, ne pas l’utiliser et le remplacer immédiatement par un nouveau masque.
5. Le masque est moins étanche et efficace s’il est porté au-dessus de la barbe.
6. Le masque respiratoire ne doit être utilisé que dans l’environnement prévu. Le non-respect du mode d’emploi peut nuire à la santé ou réduire l’efficacité du masque.
7. Le masque respiratoire ne peut pas garantir la protection prévue s’il n’est pas porté correctement ou s’il est endommagé.
8. Ne jamais altérer ou modifier le masque respiratoire.
9. Ce masque respiratoire ne fournit pas d’oxygène. Utiliser uniquement dans des espaces convenablement ventilés avec suffisamment d’oxygène pour pouvoir respirer.
10. Ce masque a une durée de vie de 3 ans. Après la date d’expiration le masque ne doit plus être utilisé.
11.Ne pas utiliser dans une atmosphère explosive.

Stockage:
1. Les masques non utilisés doivent être conservés dans un lieu bien ventilé, sec et à l’abri de la lumière. Tenir loin du feu, des polluants et des sources éventuelles de pollution.
2. Température de stockage : -20℃ à 50 ℃ et moins de 80% d’humidité relative.
3. Laisser les masques dans leur boîte d’emballage d’origine pendant le transport pour les protéger contre tout dommage mécanique et pour éviter leur contamination.

Restrictions d’utilisation: Ne pas utiliser le produit dans une atmosphère explosive. Jeter et remplacer le masque respiratoire s’il est endommagé ou si la résistance respiratoire devient excessive.
Ce masque respiratoire est conforme au Règlement (UE) 2016/425 et à la norme EN 149:2001+A1:2009.

Instructions de pose:



Organisme notifié : BSI Group The Netherlands B.V
Adresse : Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Amsterdam | Bolte postale 74103, 1070 BC Amsterdam, les Pays-Bas



Fabricant :
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing, province du Zhejiang, Chine
Site de téléchargement de la déclaration UE de conformité:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

Représentant européen:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, l’Allemagne

Le logo ZD sur le produit indique Zhende Medical Co., Ltd.
Ce mode d’emploi sera traduit dans toutes les langues des pays prévus pour la vente.

Version : 03
Date de rév. : 2021.09.25

Gebruiksaanwijzingen

Productnaam: Mondmasker met FFP2-filter NR
FFP2 staat voor het beschermingsniveau van het masker en NR betekent niet-herbruikbaar

Model: N9501F

Gebruiksdoel:
Filterende halfmaskers, zoals RPE, gebruiken filters om vuile stoffen uit de ingeademde lucht te verwijderen, en om bescherming te bieden tegen deeltjes, maar niet voor vluchtdoeleinden

Let op:
1. Selecteer het type masker en bepaal de geschiktheid ervan in functie van het beoogde gebruik.
2. Het ademhalingsmasker moet worden weggegooid wanneer het kapot is, het lastig is om door te ademen of vervuild is door lichaamsvloeistoffen.
3. Dit masker is wegwerpbaar, mag niet worden hergebruikt of voor meer dan één shift worden gebruikt.
4. Controleer het masker vóór gebruik. Zorg ervoor dat het masker geen gebroken oorlussen, gaten of andere gebreken vertoont. Als er schade wordt geconstateerd, gebruik het dan niet en vervang het onmiddellijk door een nieuw exemplaar.
5. De doeltreffendheid wordt verminderd als het gezichtshaar of de baard onder de gelaatsafdichting komt.
6. Het masker mag alleen worden gebruikt in de beoogde omgeving. Het niet opvolgen van de instructies kan schadelijk zijn voor de gezondheid of de effectiviteit verminderen.
7. Het masker kan niet de beoogde bescherming bieden als het masker niet correct is opgezet of beschadigd is.
8. Verander of wijzig dit masker nooit op enigerlei wijze.
9. Dit masker levert geen zuurstof. Gebruik het alleen in goed geventileerde ruimtes die voldoende zuurstof bevatten.
10. Het masker heeft een houdbaarheidstermijn van 3 jaar. Na de houdbaarheidsdatum mag het masker niet meer worden gebruikt.
11.Gebruik het niet in een explosieve omgeving.

Opslag:
1.De ongebruikte maskers moeten worden opgeslagen in een goed geventileerde, droge ruimte, beschermd tegen licht. Houd het uit de buurt van brand, vervuilende stoffen en potentiële verontreinigingsbronnen.
2. Opslagtemperatuur: -20℃ tot 50 ℃ en minder dan 80% relatieve luchtvochtigheid.
3. Bewaar de maskers tijdens het transport in de originele verpakkingsdozen om ze te beschermen tegen mechanische beschadiging en vervuiling.

Gebruiksbeperkingen: Do not use the product in explosive atmospheres. Discard and replace respirator if it becomes damaged or breathing resistance becomes excessive.
Het masker voldoet aan Verordening (EU) 2016/425 en is in overeenstemming met EN 149:2001+ A1:2009.

Gebruiksaanwijzingen:



Aangemelde Instantie: BSI Group The Netherlands B.V.
Adres: Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Amsterdam Postbus 74103, 1070 BC Amsterdam, Nederland



Fabrikant:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Provincie Zhejiang, China
EU-verklaring van overeenstemming internet-downloadadres:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

Europese Vertegenwoordiger:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 München, Duitsland

Het logo ZD op het product duidt op Zhende Medical Co., Ltd.
Deze handleiding wordt vertaald in alle talen van de beoogde landen voor verkoop of voor kopieën van de vertalingen.

Versie: 03
Datum van herziening: 09.25.2021

反面

Gebrauchsanweisung

Produktbezeichnung: FFP2 PARTIKELFILTERMASKE NR
FFP2 BEZEICHNET DAS LEISTUNGSNIVEAU DER MASKE UND NR BEDEUTET NON REUSABLE, NICHT WIEDERVERWENDBAR

Modell: N9501F


Vorgesehene Verwendung:
Partikelfiltermasken, innerhalb der PSA verwenden Filter, um beim Einatmen Schadstoffe aus der Atemluft zu entfernen und vor Partikeln zu schützen.

Warnung:
1. Wählen Sie die entsprechende Atemschutzmaske aus und bestimmen Sie die Eignung der Atemschutzmaske entsprechend des Verwendungszwecks.
2. Die Atemschutzmaske sollte nicht weiter verwendet werden, wenn sie kaputt ist, das Atmen mit Maske schwerfällt oder sie durch Körperflüssigkeiten verschmutzt ist.
3. Diese Atemschutzmaske ist für den Einmalgebrauch bestimmt. Bitte nicht wiederverwenden oder für mehr als eine Arbeitsschicht benutzen.
4. Überprüfen Sie die Atemschutzmaske vor dem Gebrauch. Stellen Sie sicher, dass keine gerissene Ohrschlaufen, Löcher oder andere Schäden an der Atemschutzmaske vorhanden sind. Sollten Schäden festgestellt werden, verwenden Sie die Maske bitte nicht und ersetzen Sie sie sofort durch eine neue Atemschutzmaske.
5. Wenn Gesichtshaare oder ein Bart unter der Gesichtsabdichtung hindurchgehen, wirkt sich dies negativ auf die Wirksamkeit aus.
6. Die Atemschutzmaske sollte nur in der vorgesehenen Umgebung verwendet werden. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann die Wirksamkeit einschränken oder zu Gesundheitsschäden führen .
7. Die Atemschutzmaske verliert ihre Schutzfunktion, wenn die Maske nicht korrekt angelegt oder beschädigt ist.
8. Verändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise.
9. Diese Atemschutzmaske liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie sie nur in ausreichend belüfteten Bereichen, die ausreichend Sauerstoff zur Lebenserhaltung enthalten.
10. Die Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums darf die Atemschutzmaske nicht mehr verwendet werden.
11. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Lagerung:
1. Die ungeöffneten Masken müssen in einer gut belüfteten, trockenen und lichtgeschützten Umgebung gelagert werden. Von Feuer, Schadstoffen und potenziellen Verschmutzungsquellen fernhalten.
2. Lagertemperatur: -20℃ bis 50 ℃ und weniger als 80 % relative Luftfeuchte.
3. Bewahren Sie die Masken während des Transports in der Originalverpackung auf, um sie vor mechanischen Beschädigungen und Verunreinigungen zu schützen.

Nutzungsbeschränkungen: Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden. Entsorgen und ersetzen Sie die Atemschutzmaske, wenn sie beschädigt, oder der Atemwiderstand zu hoch ist.
Die Atemschutzmaske entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 und erfüllt die Norm EN 149:2001+ A1:2009.

Anwendungsanleitung:

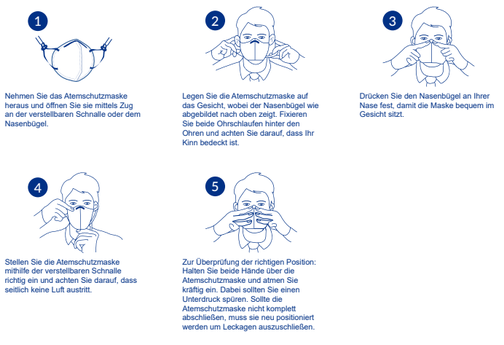

Benannte Stelle: BSI Group The Netherlands B.V
Adresse: Say Building, John M. Keynesplein 9,1066 EP Amsterdam | P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam Niederlande



Hersteller:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
Link zum Download der EU-Konformitätserklärung:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

Europäische Vertretung:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany

Die Kennzeichnung des ZD-Logos auf dem Produkt weist auf, Zhende Medical Co., Ltd hin.
Diese Gebrauchsanweisung wird in alle Sprachen der vorgesehenen Vertriebsländer übersetzt.

Version: 03
Datum der Überarbeitung: 25.09.2021

Istruzioni per l’uso

Nome prodotto: FFP2 NR respiratoria
FFP2 significa che il livello di performance della maschera e NR indica che non è riutilizzabile

Modello: N9501F


Uso previsto:
Le semimaschere filtranti, come RPE, utilizzano filtri per rimuovere i contaminanti dall’aria inspirata e per proteggere dalle particelle tranne che per motivi di fuga.

Avvertenza:
1. Selezionare la tipologia di respiratore e determinarne l’idoneità in funzione dello scopo previsto.
2. Il respiratore andrà smaltito una volta danneggiato o contaminato da fluidi corporali, nonché qualora dovesse iniziare ad ostacolare la respirazione.
3. Il respiratore è monouso: non riutilizzare né mantenere montato per più di un “turno”.
4. Controllare il respiratore prima dell’uso. Accertarsi che gli elastici per le orecchie non siano danneggiati e che il respiratore non sia bucato o danneggiato in altro modo. Nel caso in cui venissero rilevati dei danni, non procedere all’uso del respiratore e sostituirlo immediatamente con uno nuovo.
5. L’efficacia del respiratore si vedrà ridotta nel caso in cui peli o barba dovessero passare al di sotto del sigillo facciale.
6. Il respiratore dovrebbe essere utilizzato soltanto negli ambienti ai quali è stato preposto. L’inadempienza alle istruzioni fornite puó nuocere alla salute o ridurre l’efficacia del respiratore.
7. Il respiratore non puó fornire la protezione adeguata se la maschera non viene indossata correttamente oppure se è danneggiata.
8. Non modificare o alterare il respiratore in alcun modo.
9. Il respiratore non pompa ossigeno. Utilizzarlo soltanto in aree adeguatamente ventilate e contenenti ossigeno sufficiente al sostenimento della vita.
10. Il respiratore ha una vita utile di 3 anni. Il respiratore non dovrà più essere utilizzato una volta trascorsa la data di scadenza.
11. Non utilizzare in atmosfere esplosive.

conservazione:
1. Le maschere ancora inutilizzate vanno conservate in un ambiente asciutto e ben ventilato e lontano da fonti di luce. Tenere lontano da fonti di calore, contaminanti o potenziali fonti di inquinamento.
2. Temperatura di conservazione: dai -20°C ai 50°C e almeno dell’80% della temperatura relativa.
3. Conservare le maschere all’interno delle confezioni originali durante il trasporto al fine di proteggerle da eventuali danni meccanici o contaminazione.

Limiti all’uso: Non utilizzare il prodotto in atmosfera esplosiva. Scartare e sostituire il respiratore se si danneggia o la resistenza respiratoria diventa eccessiva.
Il respiratore rispetta il regolamento (UE) 2016/425 ed è conforme a EN 149:2001+ A1:2009.

Istruzioni di

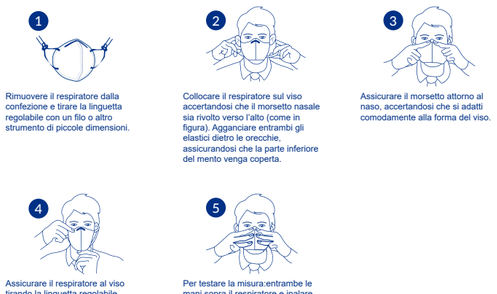

Organismo notificato: BSI Group The Netherlands B.V
indirizzo: Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Amsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Amsterdam The Netherlands



Fabbricante:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu, 312035, Shaoxing, Provincia Zhejiang, Cina
Indirizzo internet per lo scaricamento della dichiarazione di conformità UE:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

European Respresentative:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munich, Germany

ZD logo marking on the product indicates Zhende Medical Co., Ltd.
Questo IFU saranno tradotte in tutte le lingue dei paesi di destinazione per la vendita o copie delle traduzioni.

Versione: 03
Data Rev: 2021.09.25

Instrucciones de uso

Nombre del producto: Mascarillas respiratorias con filtro para partículas FFP2 NR
FFP2 representa el nivel de rendimiento de la mascarilla, y NR, no reutilizable

Modelo: N9501F

Uso previsto:
Las mascarillas de filtración de partículas, al igual que los equipos de protección respiratoria, utilizan filtros para eliminar los contaminantes del aire que se respira, y para proteger de las partículas, excepto para fines de evacuación.

Advertencia:
1. Seleccione el tipo mascarilla de protección respiratoria y determine su idoneidad según el uso previsto.
2. La mascarilla de protección respiratoria se debe desechar cuando esté rota, sea difícil respirar o cuando esté contaminada por fluidos corporales.
3. Esta mascarilla de protección respiratoria es desechable, no es reutilizable. No se debe usar durante más de un turno.
4. Compruebe la mascarilla de protección respiratoria antes de usarla. Asegúrese de que las gomas no estén rotas, de que no haya agujeros o de que no haya otros defectos en la mascarilla de protección respiratoria. Si detecta cualquier tipo de defecto, no utilice la mascarilla de protección respiratoria y remplácela por una nueva inmediatamente.
5. La eficacia se verá reducida si el vello facial o la barba sobresalen de la zona de ajuste a la cara.
6. La mascarilla de protección respiratoria solo se deberá usar en un entorno previsto. No seguir las instrucciones puede causar lesiones o reducir su eficacia.
7. La mascarilla de protección respiratoria no puede ofrecer la protección prevista si no se coloca correctamente o si está dañada.
8. Nunca lleve a cabo alteraciones ni modificaciones de ningún tipo en la mascarilla.
9. Esta mascarilla de protección respiratoria no suministra oxígeno. Se debe usar únicamente en zonas adecuadamente ventiladas con suficiente oxigeno para sustentar la vida.
10. La mascarilla de protección respiratoria tiene una vida útil de 3 años. La mascarilla de protección respiratoria no se debe utilizar una vez superada la fecha de expiración.
11. No usar en atmósferas explosivas.

Almacenamiento:
1. Las mascarillas sin usar se deben almacenar en un entorno bien ventilado, seco y alejado de la luz. Mantener alejado del fuego, de contaminantes y de cualquier posible fuente de contaminación.
2. Temperatura de almacenamiento: - 20 ºC a 50 ºC y menos de 80 % de humedad relativa.
3. Mantener las mascarillas en su envasado original durante el transporte para protegerlas frente a la contaminación y el deterioro mecánico.

Limitaciones de uso: No utilizar el producto en atmósferas explosivas. Deseche y reemplace la mascarilla respiratoria si se daña o la resistencia a la respiración es excesiva.
La mascarilla de protección respiratoria cumple con el Reglamento (UE) 2016/425, y es conforme a EN 149:2001+ A1:2009.

Instrucciones de



Organismo notificado: BSI Group The Netherlands B.V
Dirección: Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Ámsterdam P.O. Box 74103, 1070 BC Ámsterdam Países Bajos



Fabricante:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Provincia de Zhejiang, China
Dirección de internet de descarga de la Declaración de Conformidad UE:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

Representante europeo:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Múnich, Alemania

La marca del logotipo ZD en el producto indica Zhende Medical Co.
Estas instrucciones de uso se traducirán a todos los idiomas de los países previstos para su venta o las copias de las traducciones.

Versión: 03
Fecha de revisión: 25/09/2021

Instruções de utilização

Nome do produto: Máscara Respiratória c/ Filtragem de Partículas FFP2 NR
FFP2 designa o nível de desempenho da máscara e NR significa Não Reutilizável

Modelo: N9501F


Utilização prevista:
As máscaras com filtragem de partículas, na qualidade equipamento de proteção respiratória, usam filtros para remover contaminantes do ar inspirado e proteger contra as partículas salvo com fins de escape.

Aviso:
1. Selecione o tipo de respirador que melhor se adequar à utilização pretendida.
2. Deve deixar de utilizar o respirador quando esta estiver danificado, quando se tornar difícil de respirar ou quando o respirador estiver contaminado com fluidos corporais.
3. O respirador é descartável, não a reutilize nem a use em mais do que um turno.
4. Examine o respirador antes da utilização. Assegure-se de que as argolas para as orelhas não estão partidas, e de que o respirador não apresenta furos nem outros danos. No caso de detetar qualquer dano, não utilize o respirador e substitua-lo imediatamente por um novo.
5. A eficácia ver-se-á reduzida se os pelos faciais ou a barba passarem por baixo da vedação facial.
6. o respirador só deverá ser utilizada no ambiente ao qual se destina. Se não seguir as instruções, poderá pôr em perigo a saúde ou reduzir a sua eficácia.
7. o respirador não pode oferecer a proteção pretendida se não for corretamente colocada ou se se encontrar danificada.
8. Nunca altere ou modifique de modo algum este respirador.
9. Este respirador não fornece oxigénio. Utilize o respirador apenas em zonas devidamente ventiladas com oxigénio suficiente para manter a vida.
10. O respirador tem uma vida útil de 3 anos. Não se deverá utilizar o respirador uma vez atingida a data de validade.
11. Não utilize em atmosferas explosivas.

Armazenamento:
1. As máscaras por utilizar deverão ser guardadas num ambiente bem ventilado, seco e afastado da luz. Mantenha longe do fogo, poluentes e fontes potenciais de poluição.
2. Temperatura de armazenamento: -20 ℃ a 50 ℃ e humidade relativa inferior a 80%.
3. Conserve as máscaras na sua embalagem original durante o transporte, com o fim de as proteger contra danos mecânicos e da possível contaminação.

Limites de utilização: Não usar o produto em atmosferas perigosas. Eliminar e substituir a máscara respiratória se sofrer danos ou se a resistência da respiração se tornar excessiva.
Este respirador encontra-se em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e com a norma EN 149:2001+ A1:2009.

Instruções de

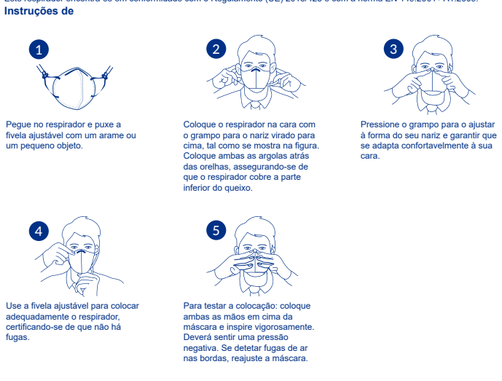

Organismo notificado: BSI Group The Netherlands B.V
Morada: Say Building, John M.Keynesplein 9,1066 EP Amesterdão P.O. Box 74103, 1070 BC Amesterdão, Países Baixos



Fabricante:
Zhende Medical Co., Ltd.
Gaobu Town, 312035, Shaoxing City, Zhejiang Province, China
Declaração de Conformidade UE disponível para download em:
http://www.zhende.com/EN/News/1/94.html

Representante Europeu:
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8,
80807 Munique, Alemanha

A marcação do logotipo ZD no produto designa a Zhende Medical Co., Ltd.
Estas instruções de utilização serão traduzidas para todos os idiomas dos países em que o produto será vendido.

Versão: 03
Data de revisão: 2021.09.25

287U